


Ulike

מכשיר להסרת שיער בשיטת IPL מדריך למשתמש

סדרת AIR

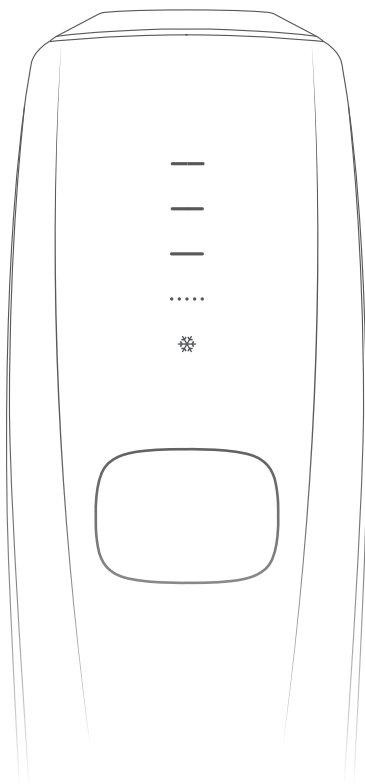

תודה שבחרת ב-Ulike.
Ulike, שנוסדה בשנת 2013, התמקדה במכשירי
הסרת שיער IPL ביתיים מהיום הראשון.
אנו מאמינים שהסרת שיער צריכה להיות חוויה
בטוחה,
חלקה וכמעט ללא כאבים.
והמכשיר הזה הולך להיות מערכת הסרת השיער
שאתה אוהב.

לפני השימוש במכשיר, אנא קרא בעיון את המדריך למשתמש,
כולל כל התוויות נגד, האזהרות ומידע הבטיחות, ושמור אותו לעיון עתידי.
האיורים במדריך זה הם לעיון בלבד.

אמצעי בטיחות

שים לב!

לא לכל אחד מתאים להשתמש במכשיר להסרת שיער IPL, אנא עיין במידע הבא בפירוט לפני השימוש במכשיר.

- אל תשתמש במכשיר על עור שיש בו כוויות, קעקועים או צלקות כדי למנוע פציעה.

- אל תשתמש במכשיר אם העור שלך השתזף באופן מלאכותי או טבעי לאחרונה או נשרף מחשיפת יתר לאור השמש. העור שלך עשוי להיות רגיש במיוחד בעקבות חשיפה ורגיש במיוחד לתופעות לוואי של הסרת שיער IPL (למשל כוויות בעור, שלפוחיות, שינוי צבע או צלקות).

- אל תשתמש אם אתה רגיש לאור שמש (רגישות לאור) או נוטל תרופות הגורמות לרגישות לצילום, למשל, אנטיביוטיקה מסויימת כגון טטרציקלין, NSAIDS כגון איבופרופן או רטינואידים כגון Accutane ו/או רטינואידים מקומיים כגון Retin A. תמיד בדוק את ההוראות המצורפות למוצרים הרפואיים שלך כדי לראות אם רגישות לאור מופיעה כתופעת לוואי. פנה לייעוץ רפואי אם אינך בטוח אם מתאים להשתמש במכשיר להסרת שיער IPL. שימוש במכשיר על עור רגיש לאור עלול לגרום לנזק לעור כולל שלפוחיות ונפיחות.

- אל תשתמש במכשיר אם יש לך היסטוריה של סרטן עור או נגעים טרום סרטניים (למשל נבי או מספר רב של שומות).

- אין להשתמש אם את בהריון, מניקה או במחזור.

- אל תשתמש במכשיר על אנשים מתחת לגיל 18. השפעות השימוש במכשיר בקבוצת גיל זו אינן ידועות.

אזהרה

- אל תשתמש במכשיר באזורים הבאים:

- אשכים, איברי מין ופטמות.

- כתמים חומים כהים או שחורים כגון כתמי לידה, שומות או יבלות.

- קעקועים או איפור עמיד.

- אזורים המושפעים ממחלות עור כגון פסוריאזיס, ויטילגו, אקזמה, אקנה, הרפס סימפלקס, זיהומים פעילים או פצעים.

- אזורים שעברו ניתוחים פלסטיים.

- ליד או סביב העיניים.

- אל תחרוג מהשימוש המצוין במדריך זה. נזק לעור עלול להתרחש לאחר יישום ממושך או חוזר על פני השטח באתר אחד.

בטיחות עיניים

המכשיר פולט פעימות אור עזות במהלך הסרת שיער, וחשיפה ישירה עלולה לגרום לנזק לעיניים.

- אל תסתכל ישירות לתוך חלון האור כאשר המכשיר מופעל.

- אל תנסה להפעיל את המכשיר לכיוון העיניים.

- אל תטפל באזורים סביב העיניים, כגון גבות או ריסים.

מומלץ להרכיב משקפי מגן ולהסיט את המבט מהמכשיר בעת הפעלת כפתור התאורה. בנוסף, מומלץ להימנע מכך שכניסת האוויר פונה לכיוון העיניים במהלך הסרת השיער. זה מאפשר מגע נכון של המכשיר עם האזור שהוסר שיער, מה שמבטיח העברת אור יעילה תוך הגנה על העיניים מאור תועה.

בטיחות חשמל ואש

- אין לפרק, לתקן ולהרכיב מחדש את המוצר ללא נוכחות של צוות מקצועי שכן הדבר עלול לגרום לנזק, תקלה או פציעה אישית.
שירות לאחר מכן מסופק על ידי מקום שירות מורשה. במידת הצורך, היצרן יכול לספק דיאגרמות מעגלים, רשימות חלקי רכיבים, תיאורים, הוראות כיול כדי לסייע לצוות השירות בתיקון חלקים.
כל שינוי בלתי מורשה אסור, מה שעלול להוביל לסיכון בלתי מקובל.
- אין להשתמש אם המכשיר פגום או שבור; לדוגמה, בית סדוק, נזק לכבלים (חוטים פנימיים גלויים), חלון אור סדוק או שבור וכו'.
- אין להשתמש ליד אמבטיות, מקלחות, אגנים או כלים אחרים המכילים מים. אין להשתמש במכשיר אם הוא חשוף למים.
- אין להשתמש אם המכשיר מתחמם בצורה לא נוחה למגע.
- אל תנסה להפעיל (להבזק) את המכשיר על פני כל משטח מלבד העור.
- אין לחסום את פתחי האוורור משני צידי המכשיר.
- אל תבצע תחזוקה במהלך השימוש.
- אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה כשהוא מופעל כדי למנוע סכנת שריפה או כוויות.

■ מצב לא מתאים

- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות, או חוסר ניסיון וידע, אלא אם כן ניתנה להם השגחה או הדרכה בנוגע לשימוש במכשיר כדי למנוע סכנת שריפה או כוויות.

- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי ילדים. יש לפקח על ילדים כדי להבטיח שהם לא ישחקו עם המכשיר כדי למנוע סכנת שריפה וכוויות.

- אם בבל החשמל פגום, יש להחליפו על ידי Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd. מרכז שירות מורשה על ידי Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd. או אנשים מוסמכים דומים על מנת למנוע סכנת התחשמלות.

- מים וחשמל הם שילוב מסוכן! כדי למנוע סכנת התחשמלות.

- אין להשתמש במכשיר זה בסביבה רטובה (למשל בחדר האמבטיה או ליד מקלחת או בריכת שחייה);
- אל תתנו למים לזרום לתוך המכשיר.

- בדוק אם המתח המצוין במכשיר מתאים למתח החשמל המקומי לפני חיבור המכשיר כדי למנוע סכנת התחשמלות או נזק ממושך למכשיר.

- אם לשקע הקיר המשמש להפעלת המכשיר יש חיבורים גרועים, התקע של המכשיר מתחמם. ודא שאתה מחבר את המכשיר לשקע קיר שהותקן כהלכה כדי למנוע סכנת שריפה וכוויות.

- אין לחשוף את המכשיר לעזעזעים כבדים כדי למנוע סכנת נזק למנורה.

- זהירות: נתק תמיד את המכשיר מהחשמל לאחר השימוש ובמקרה של הפסקת חשמל כדי למנוע סכנת נזק למכשיר.
- סיווג קבוצת הסיכון: קבוצה פטורה.

- הרחק את המכשיר ממון, אבק ואור, אחרת הביצועים יושפעו.

- הרחק את המכשיר מהישג ידם של ילדים וחיות מחמד.

- אין לחשוף אזורים שהוסרו שיער לשמש. המתן לפחות 48 שעות לאחר הסרת השיער לפני חשיפת העור המוסר לאור שמש ישיר. העור שלך עשוי להיות רגיש במיוחד בעקבות הסרת שיער IPL ורגיש במיוחד לכוויות שמש. יש למרוח קרם הגנה (SPF 15 ומעלה) על האזור שהוסר שיער או לכסות את האזור שהוסר בבגדים מתאימים.

■ אמצעי זהירות

- המכשיר מיועד למשתמש יחיד.
- כישורים מקצועיים והכשרה אינם נדרשים לשימוש, אנא עיין במדריך למשתמש לפני השימוש.
- מכשיר זה אינו מומלץ לשימוש על שיער אדום, אפור, בלוניני או בהיר מאוד מאחר והוא אינו יעיל על צבעי שיער אלו.

מידע על המוצר

שם המוצר: IPL מכשיר להסרת שיער
דגם: UI07

■ מידע לשימוש

מכשיר להסרת שיער IPL מיועד להסרת שיער לא רצוי. המכשיר מיועד גם להפחתה ממושכת בצמיחה מחודשת של שיער, המוגדרת כהפחתה ארוכת טווח ויציבה במספר השערות הצומחות כאשר נמדדת ב-6, 9 ו-12 חודשים לאחר השלמת משטר טיפול.

■ האריזה מכילה

מכשיר הסרת שיער IPL*1


מתאם*1

כבל חשמל*1

מדריך למשתמש*1

סבין גילוח*1


משקפי מגן*1

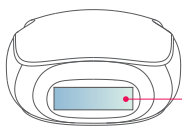

חלון אור ספיר




משקפי מגן

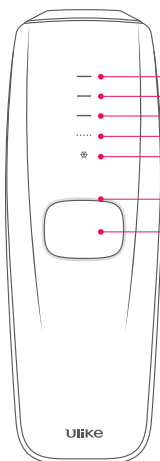


- • מחוון מצב רך
- • מחוון מצב גוף
- • מחוון מצב עבודה
- • מחוון גלישה אוטומטית
- * • מחוון קירור קרח / אינדיקטור יופי
- מחוון חישת עור
- כפתור תאורה

Ulike

- LED Button
- Power button/
Mode switch button

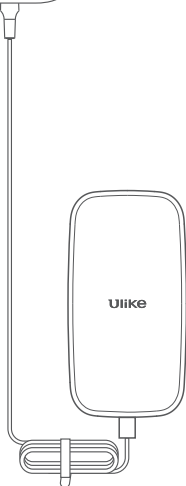

מתאם

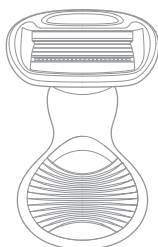

מכשיר גילוח



כבל חשמל

מכשיר הסרת שיער IPL הוא מכשיר מבוסס אור להסרת שיער לטווח ארוך, המתאים לשימוש ביתי. הוא מיועד להסרת שיער לא רצוי ולהפחתה ממושכת בצמיחה חוזרת של שיער. האזורים האידיאליים לשימוש כוללים את בתי השחי, קו הביקיני, הידיים והרגליים. המכשיר עושה שימוש בטכנולוגיית IPL עם רמת אנרגיה נמוכה, כולל 3 מצבי כוח. טכנולוגיית אור פועם אינטנסיבי (IPL) מסוגלת להשיג תוצאות של הסרת שיער לטווח ארוך ברמות אנרגיה נמוכות בהרבה מהשימוש במכשירים אחרים להסרת שיער מבוססי אור.

עקרון הפעולה הוא פוטותרמוליזיס סלקטיבי, והמשמעות היא שהמכשיר פוגע בצמיחת השיער באמצעות חימום סלקטיבי של זקיקי השיער באמצעות אור.

ביצד להשתמש

טווחי יישומים

התקן להסרת שיער IPL מיועד להסרת שיער של אזורים גדולים (כגון ידיים, רגליים, חזה) ואזורים קטנים (כגון אצבעות, שפם). אנא בדוק את טבלת גוון העור שלהלן כדי לקבוע אם IPL מתאים לך.

שימוש על סוגי עור וסוגי שיער מקובלים

מכשיר זה מיועד לשמש רק ב-Fitzpatrick Skin Types I-V. אנא עיין בתרשים שלהלן.

- אנא זזה את גוון העור שלך ובדוק את התרשים הבא כדי לראות אם המוצר מתאים:

גוון עור צבע שיער	לבן	ב'ל	חום בהיר	חום בינוני	חום כהה	חום שחור כהה
לבן/אפור	✗	✗	✗	✗	✗	✗
אדום	✗	✗	✗	✗	✗	✗
בלונד בהיר	✗	✗	✗	✗	✗	✗
חום בהיר	✓	✓	✓	✓	✓	✗
חום	✓	✓	✓	✓	✓	✗
חום כהה	✓	✓	✓	✓	✓	✗
שחור	✓	✓	✓	✓	✓	✗

(מקרא סימנים: ✗ פירושו לא רלוונטי ✓ פירושו רלוונטי)

הערות:

- בחר את מצב הסרת השיער המתאים ביותר לסובלנות של העור שלך, ואם אין תופעות לוואי, עבור בהדרגה למצבי אנרגיה גבוהים יותר.
- צבע העור שלך עשוי להשתנות, לדוגמה, אם העור שלך התכהה כתוצאה משיזוף: הוא עלול להיות כהה יותר מהטון הקודם במהלך הסרת השיער. לכן, חשוב לבדוק את ההגדרות שיש להשתמש בהן לפני כל סשן של הסרת שיער ולהתאים את ההגדרות בהתאם לאזורים השונים שבהם אתה מבצע את הסרת השיער. חלק מהאזורים עשויים להיות כהים יותר מאחרים.


השתמש בסכין הגילוח שסופקה יחד עם המכשיר כדי להסיר את כל השיער הנראה על העור לפני השימוש במכשיר. ודא שאין שיער שנותר מעל פני השטח של העור, שכן זה יכול לגרום לאי נוחות. הסר כל קוסמטיקה, לוטיונים וקרמים מהאזור שברצונך לטפל בו. נקו את האזור שנבחר וטפחו אותו יבש.

בדיקת עור


- לפני התחלת הסרת השיער, אנו ממליצים לבדוק את העור שלך לתגובות.
- בחר את האזור בגוף שבו ברצונך לבצע את הסרת השיער. חבר את המתאם לכבל החשמל, ולבסוף, חבר את כבל החשמל למקור החשמל. לחץ על כפתור ההפעלה כדי להדליק את המכשיר. הנח את חלון האור הספיר על העור הנבחר ולחץ עד שנורה האינדיקטור של חיישן העור נדלקת. העבר את המכשיר למיקום ניסוי נוסף ושנה את מצב הסרת השיער, לחץ על כפתור התאורה לביצוע ניסוי נוסף. אם זה מרגיש נעים, שנה את מצב הסרת השיער ונסה אותו במיקום ניסוי נוסף.

- אל תבצע יותר מקטף אור אחד באותו מקום. המתן 2 שעות לאחר הניסוי כדי לוודא שהעור שלך מתאים להסרת השיער ואין תגובות לזווי לאנרגיית האור. אם אין שינוי בעור לאחר 2 שעות ולא הרגשת חום אינטנסיבי במהלך הסרת השיער, מצב האנרגיה הגבוה יותר שבו השתמשת מתאים לעור שלך. תוכל להמשיך לבדוק את רמת האנרגיה הבאה עד שתמצא את רמת האנרגיה המרבית המתאימה לאזור העור המיועד.


הוראות

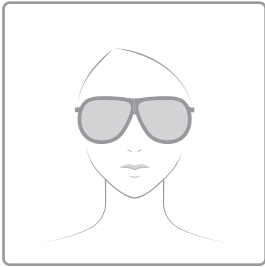


2. הרכיבו את המשקפיים לפני תחילת הסרת השיער.

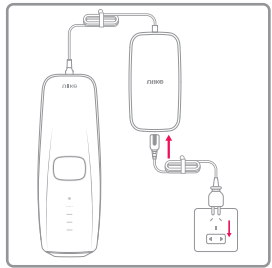

1. חבר את כבל מתח AC עם המתאם, ולאחר מכן חבר את הקצה השני של כבל החשמל לשקע חשמל. (הערה: זה מכשיר פלאג-אין, נא לשמור אותו תמיד מחובר לחשמל במהלך הסרת השיער. אחרת, זה לא יעבוד).

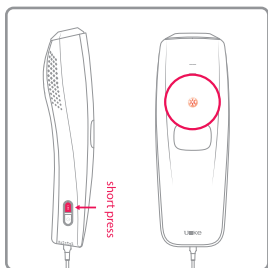


4. לחיצה קצרה על לחצן LED כדי לשנות את מחוון היופי.
למחוונים אדומים/צהובים יש פונקציית יופי. למחוון הלבן אין פונקציית יופי, המראה את פונקציית קירור הקרח.

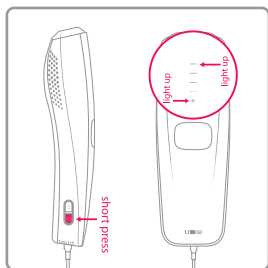


3. לחץ על לחצן ההפעלה בצד המכשיר כדי להפעיל אותו. מצב ברירת המחדל הוא Soft Mode, ופונקציית הקירור תהיה פעילה במהלך כל התהליך, כך שהאינדיקטורים הרלוונטיים יהיו דולקים בעת הפעלת המכשיר.


הערה: פונקציית הקירור נועדה לחוויית הסרת שיער טובה יותר, אך לפונקציה עצמה אין השפעה טיפולית.

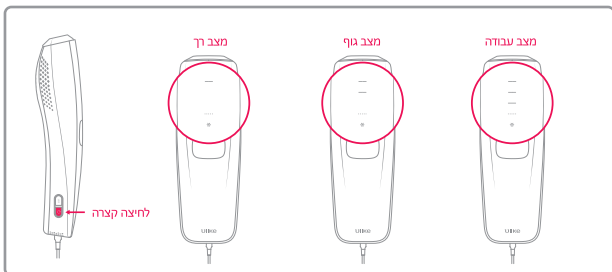

5. המכשיר מציע 3 מצבים.
בזמן שהמכשיר מופעל, לחץ על לחצן ההפעלה כדי לעבור למצב הסרת שיער הרצוי. המצבים עוברים לפי הסדר הבא: מצב רך - מצב גוף - מצב כוח - מצב גוף - מצב רך.

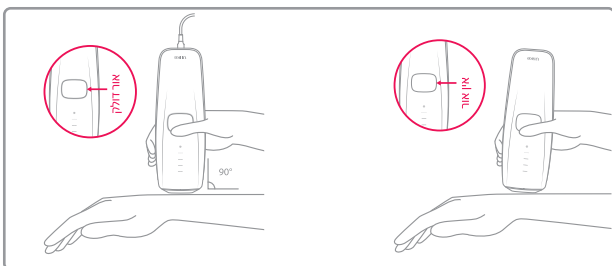


6. A, ראשית, מקם את חלון האור ספיר בצורה אנכית על אזור העור להסרת שיער, B, הבטחת מגע מלא עם העור שלך, מסומן על ידי מחוון חישת העור מאיר לבן. C, לבסוף, לחץ על כפתור ההדלקה כדי להתחיל בהסרת שיער.
הערה: אם מחוון חישת העור אינו מאיר אור לבן, זה מצביע על מגע לא מספיק בין חלון אור הספיר לעור, והמכשיר לא ישדר פעימת אור.

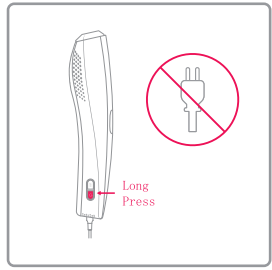

7. לאחר סיום הסרת השיער, לחץ והחזק את לחצן ההפעלה למשך 1 או 2 שניות על מנת לכבות את המכשיר. נורית החיווי תיכבה, ומסמנת שהמכשיר כבוי. חשוב לא לנתק את המכשיר ישירות מבלי לכבות אותו כראוי תחילה.


הערה: למכשיר יש מודול זיהוי מהירות מאוורר המזהה את מהירות המאוורר. כאשר מהירות המאוורר נמוכה מ-70% מהמהירות המדורגת, המכשיר יכבה אוטומטית, כדי למנוע את הטמפרטורה הגבוהה המקומית המובילה לכוויות.

שיטות להסרת שיער

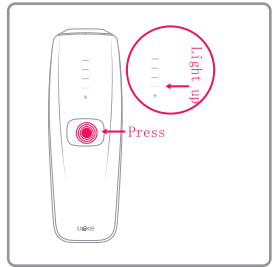


1. המכשיר מציע שני מצבי הפעלה נפרדים: מצב גלישה אוטומטית ומצב ידני.
2. איך מחליפים את שיטות הסרת השיער? - לחץ לחיצה ארוכה על לחצן התאורה למשך 1 עד 2 שניות כדי לעבור למצב גלישה אוטומטית או למצב ידני.
3. מצב רק, מצב גוף ומצב כוח, תומכים הן במצב גלישה אוטומטית והן במצב ידני.

• מצב ידני (מתאים לאזורים קטנים כגון השפה העליונה):

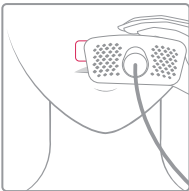

מצב ידני הוא שיטת ברירת המחדל להסרת שיער בעת ההפעלה. מקם את חלון אור ספיר אנכית על האזור הנבחר ובמגע מלא עם העור. ומחווה חישת העור יידלק. לאחר מכן לחץ על כפתור התאורה כדי להתחיל בהסרת השיער. העבר את חלון אור ספיר לאזור הבא וחזור על השלבים שלמעלה.

• גלישה אוטומטית (עבור אזורים גדולים כגון ידיים, רגליים):

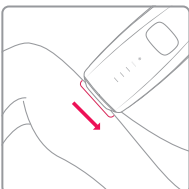

לחץ לחיצה ארוכה על לחצן התאורה למשך 1 או 2 שניות, מחווה הגלישה אוטומטית יידלק. נא לשמור את חלון האור ספיר במגע מלא עם העור ולהמשיך להזיז את המכשיר על האזור הנבחר כדי להבטיח שהעור מכוסה בצורה אחידה ולהימנע מחסר של אזורי הסרת שיער, המכשיר פולט באופן אוטומטי פעימות אור במרווחים מוגדרים מראש, ומבטל את הצורך בהתערבות ידנית.

במצב גלישה אוטומטית, לחץ שוב על לחצן התאורה למשך 1 או 2 שניות כדי לעבור למצב ידני.

■ לוח זמנים מומלץ להסרת שיער

שבועות 1-4: שלוש פעמים בשבוע, כל יומיים.
משבוע 5: התאם את לוח הזמנים להסרת שיער פעם בשבועיים או פעם בחודש, על סמך צמיחת השיער שלך.
שים לב שאתה יכול להתאים אישית את לוח הזמנים והמצב בהתאם לסוג השיער שלך. לשיער עבה או כבד יותר, אתה יכול לשקול להגדיל את המצבים והתדירות במסגרת הסובלנות שלך.
זכור כי צמיחת שיער אינדיבידואלית משתנה, והתוצאות עשויות להיות שונות עבור כל אדם.

■ טיפוח העור לאחר הסרת שיער

לאחר הסרת שיער, רצוי למרוח קרם גוף או ג'ל קומפרס קר לטיפול נכון.
בנוסף, הימנע מחשיפת אזורים שהוסרו שיער לאור השמש. המתן לפחות 48 שעות לאחר הסרת השיער לפני שתאפשר חשיפה ישירה לאור שמש לעור שהוסר. והימנע ממוצרי טיפוח המכילים אלכוהול וחומרים חומציים/בסיסיים.

תחזוקה

ניקוי

- על מנת להבטיח את התוצאות הטובות ביותר ואת חיי השירות של המוצר, נא לנקות את המוצר לפני ואחרי כל שימוש כדי למנוע הצטברות פסולת.
- לפני הניקוי יש לכבות את המכשיר ולנתק אותו מהחשמל כדי לאפשר למכשיר להתקרר.
- השתמש במטלית רכה, נקייה ויבשה כדי לנגב ולנקות את משטח החלון הבהיר.
- לעולם אל תשטוף את המוצר והאביזרים מתחת לברזים או במדיחי כלים.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים (משחת שיניים וכו') או נוזלים קורוזיביים (בנדין, שמן מנוע, אצטון וכו') לניקוי המוצר.
- הערה: אם המים לא מתנקים היטב, השתמשו במטלית טבולה באלכוהול בריכוז 75% לניקוי המכשיר.
- בסיום הניקוי, אנא ערכו בדיקה ויזואלית כדי לבדוק אם יש שאריות לכלוך.
- אם המכשיר אינו נקי מבחינה ויזואלית, אנא חזור על שלבי הניקוי לעיל.

אחסון

- נקו את המכשיר לפני אחסנתו.
- אחסן את המכשיר בסביבה יבשה נטולת אבק בטמפרטורה של -10°C ~ $+55^{\circ}\text{C}$ / 14°F ~ 131°F

מיחזור

- על מנת למזער את הסכנות לבריאות ולסביבה ולהבטיח שניתן למחזר חומרים, יש להשליך מוצר זה למתקן איסוף נפרד לפסולת של מכשירי חשמל ואלקטרוניקה בהתאם לדרישות הסביבה המקומיות.



פתרון בעיות

להלן סיכומי הבעיות הנפוצות ביותר שאתה יכול להיתקל בהן במכשיר. אם אינך מצליח לפתור את הבעיה עם המידע שלהלן, אנא צור קשר עם המפיץ המקומי שלך או למוכר

בעיה	סיבה אפשרית	פתרון
לא מצליח להתחיל כרגיל	חשמל לא מחובר	בדוק אם המכשיר מחובר לחשמל.
חלון התאורה לא יהיה במגע מלא עם העור שלך	ייתכן שחלון האור לא יהיה במגע מלא עם העור שלך	ודא שחלון האור מכסה את עורך במלואו; ברגע שמחווון חישת העור נדלק, לחץ על לחצן התאורה.
כאב בלתי נסבל במהלך הסרת השיער	לא גולח שיער באזור המטופל	לפני השימוש יש לגלח את השיער באזור המיועד לעיבוד. אי ביצוע פעולה זו עלול לגרום לשריפת שיער במכשיר, שעלול לגרום לאי נוחות.
	המצב שנבחר חזק מדי	בחר מצב בעצימות נמוכה יותר
	חלון האור פגום	לאחר 30 שניות של הפעלה, בדוק את חלון האור לאיתור ערפל מים. אם אף אחד לא קיים, אנא פנה לתמיכה של Ulike לסיוע נוסף.
לאחר השימוש, אזור הסרת השיער הופך לאדמומי	אדמומיות קלה היא נורמלית ואינה מזיקה לגוף, והיא תדעך בקרב	מרחו ג'ל אלורה כדי להרגיע את העור, או השתמשו באפקט הקירור של חלון האור.
תוצאה בלתי מספקת בהסרת שיער	אתה משתמש ברמת אנרגיה נמוכה מדי עבורך	אנא בחר רמה גבוהה יותר בפעם הבאה next time
	פספס כמה נקודות באזור שהוסר שיער	ההבהוב צריך להיות בסמיכות וצריכה להיות חפיפה מסוימת בין אזורי ההבזק.
	המכשיר הזה לא מתאים לגוון העור או צבע השיער שלך	אם השיער שלך בלונדיני בהיר, אפור, אדום או לבן, הסרת השיער לא תהיה יעילה.
	תדירות שימוש לא מספקת	לתוצאות טובות יותר של הסרת שיער, אנו ממליצים על לוח הזמנים הבא להסרת שיער: שבועות 1-4: כל יומיים שבועות 5-12: פעם בשבועיים או פעם בחודש
המכשיר מתחמם במהלך השימוש	התגובה שלך לחשיפה לאור איטית או שהשיער שצריך להסיר הוא עבה.	אזורי שיער עבים יותר, כגון קו הביקיני, בתי השחי והזקן, עשויים לדרוש יותר זמן והסרת שיער חוזרת ונשנית כדי לראות ירידה משמעותית. לסוגי עור שונים עשוי לקחת זמן רב יותר להגיב לאור, לכן מומלץ להמשיך להשתמש במוצר שלנו עד 3 חודשים לתוצאות מיטביות.
	עשוי להיות בגלל הפעלה ממושכת	כבה את המכשיר ותן לו הפסקה לכמה דקות.

מפרט טכני

שם המוצר	מכשיר להסרת שיער בשיטת IPL
דגם מוצר	UI07
מידות (B x H x D)	197 mm x 68 mm x 43 mm
קלט חשמלי	INPUT: 100V-240V~, 50/60Hz, 1.5A
רמת אנרגיה	3 levels
גודל האזור המואר	3.6cm ²
אורך גל	580nm~1200nm
אנרגיה פלט	5.44J~19.44J
מרווח חשיפה מתמשך	0.4s~3.0 s
גרסת התוכנה:	V1.0
מצבים תפעוליים	Operating temperature: 5°C ~ 30°C/ 41°F ~ 86 °F Humidity: 5%~ 80%RH Relative pressure: 80kPa ~106kPa
תנאי אחסון והובלה	Storage temperature:-10°C ~ 55°C/ 14 °F ~ 131 °F Humidity: 5%~ 90%RH Relative pressure: 50kPa~106kPa
מתאם	INPUT: 100V-240V~, 50/60Hz, 1.5A
לאחר הוצאת המכשיר מאחסון בטמפרטורת סביבה הנמוכה מ-10°C, ידרש זמן מסוים למכשיר לשוב לפעולה רגילה בטמפרטורת סביבה של 20°C.	שעתיים
לאחר הוצאת המכשיר מאחסון בטמפרטורת סביבה הגבוהה מ-60°C, ידרש זמן מסוים למכשיר לשוב לפעולה רגילה.	שעתיים

סמלים

תאור	סמל	מס.
שימוש ביתי		1
WEEE (הוראות טיוב פסולת חשמלית ואלקטרונית). מוצרי הפסולת צריכים להיות מטופלים בהתאם לחוק.		2

3		שמור מרחק מגשם
4		יצרן
5		סמל אזהרה לשימוש עם מכשיר IPL: אל תשתמש בו ישירות על העיניים, מכיוון שהאור האינטנסיבי שמפיק המכשיר עלול לגרום נזק לעיניים.
6		עיין בהוראות השימוש.
7		זהירות
8		DC יציאת
9		מספר מקסימלי של חבילות/פריטים זהים שניתן להניח על החבילה התחתונה, כאשר '5' הוא המספר המגביל.
10		אין להשתמש במכשיר זה במקלחת אמבטיה או במאגר מלא במים.
11		נציג מורשה בקהילה האירופית/האיחוד האירופי.
12		מוצרים המסומנים בסמל זה עומדים בדרישות של הנחיות האיחוד האירופי.
13		מוצרים המסומנים בסמל זה עומדים בדרישות של הוראת RoHS 2011/65/EU עם תיקון (EU) 2015/863.

מספר חשבונית	שם החנות:	תאריך רכישה:
מספר סידורי:	דגם:	שם היצרן:
E-MAIL:	טלפון:	שם הלקוח:
כתובת:		

BKD GROUP בע"מ, (להלן "החברה") אחראית בזה בפני הרוכש (להלן "הלקוח") לפעולתו התקינה של המכשיר (להלן "המוצר") לפי הפרטים המצוינים לעיל, בכפוף לתנאים כדלקמן:

האחריות למוצר היא לתקופה של 12-3 חודשים מיום הרכישה בכפוף לחוק הגנת הצרכן | אחריות תקפה רק בצירוף חשבונית רכישה | האחריות למתן שירות באמצעות החברה בלבד ו/או מעבדות שירות מטעמה | הובלת המוצר למעבדה היא באחריות הלקוח בלבד, במידה ויבקש להשתמש בשירותי ההובלה של החברה, הוצאות ההובלה יחולו על הלקוח | האחריות כוללת תיקון ללא תמורה של קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות ולהחליף, במידה ויידרש, את המוצר כולו או חלק ממנו | אין אחריות חלה במקרה של שבר או נזק | אחריות על סוללה 6 חודשים, אחריות על מטען 3 חודשים.

האחריות לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:
התקלה במוצר היא עקב שימוש לא מתאים, או שימוש שלא למטרה, או בניגוד להוראות, או תקלות שמקורן במתח חשמל, או כל חיבור חשמלי שלא סופק על ידי החברה | המוצר תוקן או טופל על ידי גורם אשר אינו מאושר מטעם החברה | בכל מקרה, בין אם בזדון ובין אם הקלקול נובע מרשלנות, כוח עליון, שפיכת נוזלים, קורוזיה, שבר, חשיפה לשמש ו/או לטמפרטורות קיצוניות, התפוצצות | האחריות לא חלה על אביזרים נלווים כגון: כיסויים, סוללות, אוזניות, מגני מסך, כבלים, נרתיקים, רמקולים ניידים וכד.

אם במהלך תיקון יתגלה כי הקלקול נגרם באחת מן הנסיבות המוזכרות לעיל ו/או בקשר עם ליקוי או אי התאמה בתוכנה, הרוכש ישלם עבור שעות העבודה שידרשו ואביזרים שיעשה בהם שימוש או תיקון בהתאם למחירון החברה שיהיו בתוקף במועד המדובר. בשום מקרה לא תהיה החברה אחראית למידע אשר נמצא על המכשיר לרבות רשימת אנשי קשר, תמונות, קבצי מדיה ואפליקציות שנרכשו באחריות הלקוח לגבות מידע זה טרם הבאת המכשיר לתיקון.



לקבלת האחריות על המוצר יש לסרוק את ה-QR ולמלא את פרטיך. ניתן גם להירשם ישירות באתר החברה www.bdk-group.com בלשונית הרשמה לאחריות.

Ulike

ulike.co.il



Scan me!

הביאו את סלון היופי אל הספה שלכם

