


Ulike

Air 3

מכשיר להסרת שיעור בשיטת IPL
מדריך למשתמש

סדרת AIR

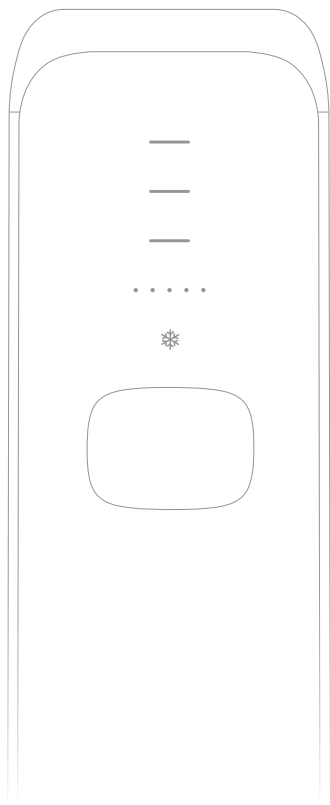

תודה שבחרת ב-Ulike.
Ulike, שנוסדה בשנת 2013, התמקדה במכשירי
הסרת שיער IPL ביתיים מהיום הראשון.
אנו מאמינים שהסרת שיער צריכה להיות חוויה
בטוחה,
חלקה וכמעט ללא כאבים.
והמכשיר הזה הולך להיות מערכת הסרת השיער
שאתה אוהב.

לפני השימוש במכשיר, אנא קרא בעיון את המדריך למשתמש,
כולל כל התוויות נגד, האזהרות ומידע הבטיחות, ושמור אותו לעיון עתידי.
האיורים במדריך זה הם לעיון בלבד.

● שים לב!

- אין למרוח ג'ל או מוצרי טיפוח (ג'ל אלוורה וכו') לפני השימוש.
- הקפידו להרכיב ולהשתמש במוצר בהתאם לתקנות הכלולות במדריך ההוראות.

- אנא קרא את "מדריך ההוראות" בעיון ושמור אותו לעיון עתידי.
- אם יש לך שאלות במהלך השימוש, אנא צור קשר עם שירות הלקוחות המקוון בשפה הנדרשת.

⦿ סכנה: תוכן הקשור לפציעה אישית עקב פעולה לא נכונה

! אזהרה: תוכן מסוכן עקב פעולה שגויה

! זהירות: תוכן הקשור לבטיחות אישית או לנזק לרכוש עקב פעולה לא נכונה



⦿ סכנה!

- אין להשתמש במכשיר ישירות לעיניים, אחרת מקור האור החזק הנפלט מהמוצר עלול לגרום לנזק לעיניים;
- במצב עבודה רגיל, אל תתאים ישירות לשקע הצד, אחרת הטמפרטורה של השקע עלולה לגרום לכוויות בעור;
- במצב עבודה רגיל, אין להכניס חפצים למוצר, אחרת זה עלול לגרום נזק לגוף האדם;
- אין כרגע נתונים לשימוש על ילדים מתחת לגיל 15, לכן אסור לילדים מתחת לגיל 15 לגעת או להשתמש בו. נא להרחיק מילדים מתחת לגיל 15 בעת השימוש במוצר.



! אזהרה!

- תופעות שליליות עלולות להיגרם אם לא יקפידו על ההוראות;
- אין למרוח אנטי-פרספירנט מיד לאחר הקרנת בית השחי;
- למניעת הכוונה וכשל בעת השימוש, נא לאשר ולנקות באופן קבוע את הכללוק של יציאת ההקרנה;
- אין למקם את יציאת ההקרנה ליד פריטים שקל לבטל את המגנטיות, אחרת היא עלולה לגרום לכשל ולנזק;
- אין להשתמש בו כאשר פתח האוורור חסום, אחרת הוא עלול לגרום לעשן ואש;
- לפעולה רגילה של המוצר, נא לא לכוון את יציאת ההקרנה לעבר עצמים שחורים;
- למניעת השחרה, שינוי צבע ושבירה, אין להקרין בגדים, שיער או פריטים אחרים;
- אין להשתמש במוצר על חיות מחמד, אחרת זה עלול לגרום לפציעה;
- זה עלול לגרום לנזק לעיניים (עלול לעיוורון) או לעור אם לא מקפידים על הוראות. אנא קרא ופעל לפי ההוראות;

- אין להרחיב או לעשות שימוש חוזר על שטח פנים, הימנע משימוש מופרז, או תדירות מופרזת, שעלולים לגרום לנזק לעור שלך;
- שימוש לרעה עלול לגרום לנזק לעיניים, נא להגן על העיניים מפני חשיפה, אין להשתמש במוצר מעל העפעפיים או ליד העיניים;
- אין להתעלם ממנגנוני הבטיחות הטבועים במוצר. למשל, הרכיבה הנכונה של המשקפיים, הדרך הנכונה להתאמה לעור וכו';
- נא לבצע בדיקת עור לפני השימוש, ולאשר את מצב העור לאחר בדיקה של שעתיים. אתה יכול להשתמש במוצר אם אין חריגות (אדמומיות או שלפוחיות) באזור המוקרן;
- במהלך השימוש, נא ללבוש את המשקפיים ולמקם את חלון האפילציה קרוב לעור לצורך פעולת האפילציה;
- לאחר השימוש, נא לנגב את מוצרי טיפוח השיער והעור המחוברים למכשיר הפילטור כדי למנוע כשל ונזק לעור;
- אנא עקוב אחר ההוראות, הרכיב משקפי מגן כראוי כדי להשתמש במוצר, כדי למנוע גירוי אור חזק;
- נא להגדיר את עוצמת הקרינה בהתאם למצב העור שלך, ולהקפיד להשתמש בה מ-1 Gear בפעם הראשונה;
- אם העור מעט חם ואדום לאחר השימוש, זה נורמלי;
- לא ניתן להשאיר את המוצר ללא השגחה לאחר הפעלתו, ובבקשה כבה אותו בזמן לאחר השימוש;
- נקו את העור כדי לוודא שהוא נקי משאריות שיער, יבש לחלוטין וללא חומרים שומניים וכתמים;
- אם הפרש טמפרטורת סביבת ההפעלה מגיע ליותר מ-20 מעלות (מסביבת טמפרטורה נמוכה לסביבת טמפרטורה גבוהה, או להיפך), נא לכבות אותה ולהמתין כשעתיים לפני השימוש בו שוב;
- אין להשתמש במוצר ליד חפצים דליקים ונפוצים (כולל מרססים, תחנות דלק וכו'), העלולים לגרום לשריפה, לפציעת התחשמלות וסכנות אחרות;
- טמפרטורת הסביבה של הפילטור היא 30-5 מעלות צלזיוס. נא לאשר את טמפרטורת החדר לפני השימוש;
- נא להימנע מקרינה אולטרה סגולה ישירה על החלק המוקרן תוך 24 שעות לאחר ההקרנה;
- אין לחשוף את המוצר לשמש או להניח אותו תחת אור אולטרה סגול לזמן ממושך, דבר שיגרם נזק חמור למוצר;
- אם המאוורר המובנה אינו פועל לאחר הפעלת החשמל (לא נשמע צליל זמזום), אל תשתמש בו, אחרת הוא עלול לגרום לכשלים כגון עשן, אש וכו';
- אין להשתמש בו באמבטיה, במקלחת או במקומות אחרים ליד המים מְקוֹר;
- נא לשמור את המוצר ואת מתאם החשמל יבשים;
- בעת שימוש במוצר, לא מומלץ להשתמש בו לאורך זמן. נא לכבות אותו למשך 10 דקות לאחר השימוש בו למשך שעה;
- אם המעטפת, העדשה או ספק הכוח פגומים, אנא הפסק להשתמש במוצר מיד. אין לתקן את המוצר ללא אישור. יש לתקן אותו על ידי צוות מקצועי ממחלקת התחזוקה של היצרן או מחלקה דומה.



- השימוש במוצר עלול לגרום לאי נוחות או השפעות שליליות על אנשים הסובלים מאלרגיות, אנשים הסובלים ממחלות עור ודלקת עור אלרגית, אנשים עם עור רגיש וכו'. אם מתרחשות תופעות לוואי כלשהן במהלך השימוש, נא להפסיק את השימוש במוצר מיד;
- אין להשתמש במוצר באזורים עם שלמות עור פגומה (כגון כוויות, שלפוחיות, חתכים, פצעים, מחלות עור פעילות או זיהומים);
- אם אתם נוטלים תרופות רגישות לאור לטיפולם חשופים, נדרשת ייעוץ רפואי לפני השימוש במוצר, אחרת השימוש במוצר עלול לפגוע בעור;
- לא מתאים לנשים בהריון, נשים מניקות, וסת נשים, צלקות גוף, סוכרת, עור שביר ועור רגיש לאור;
- מחלות לב חמורות, יתר לחץ דם בינוני עד חמור, גידולים ממאירים, פוליקוליטיס, מחלות עור זיהומיות, עור שרוף והפרעות נגזרות קרישה אסורות;
- אין להשתמש אם יש לך חילוף חומרים לא תקין של קולגן, כולל היסטוריה של צלקות וריפוי פצעים לקוי;
- חולים עם מחלות כלי דם, כגון דליות והרחבת כלי דם באתר ההקרנה;
- אין להשתמש אם העור שלך רגיש לאור ונוטה לפריחה או אלרגיות;
- נא לא להשתמש בו אם האזור המוקרן שלך נגוע, חולה בהרפס סימפלקס, נגעים בעור והמטומה אסורה;
- דיכוי מחלות תגובה חיסונית (כולל זיהום ב-HIV, לופוס אריתמטוסוס, פורפיריה וכו') אסור;
- חל איסור על כל חולה עם הפרעת דימום, ואסור על מי שמשתמש באיזוטרטינואין, חומצת פרי (AHA), חומצה סליצילית (BHA) או חומצה אזלאית;
- נא להשתמש במוצר זה בזהירות למי שמשתמש בהסרת שיער כימית תוך 30 יום, לאלה שהשתמשו במוצרים להלבנת עור בזמן קצר, או לאלה שהשתמשו במרכיבי ויטמין A;
- אין להשתמש עם מוצרי שמן אתרים בו זמנית. אנא ודא שהעור באזור הבהיר נקי ויבש, וללא שימוש בקרמים, חומרי סיכה ומוצרי קוסמטיקה אחרים;
- אם משטח העור אינו נקי ויבש, הדבר עלול להשפיע על חווית השימוש במוצר ואף לפגוע במוצר;
- אסור במהלך נטילת תרופות אספירין, שימוש בתרופות מדכאות חיסון, איזוטרטינואין ותרופות נוספות. השימוש האחרון בתרופות רגישות לאור אסור (כגון טטרציקלין וסולפה);
- המוצר אסור לשימוש למי שהזריקו לאחרונה חומרי מילוי ורעלים.

● אין להשתמש בחלקי הגוף הבאים או בתנאים הבאים

1/ תוך-פה, איברי המין, רירית וכו'.	6/ אזור אקנה	11/ בתוך הטבור
2/ ניתוח פלסטי	7/ כתמים ושומות	12/ וריד גדול
3/ קשר גרון	8/ גבות, שיער	13/ קעקוע, ציור גוף
4/ גלגל עין, עפעף, מסביב לעיניים	9/ אוזן	
5/ ראש	10/ פטמה, אראולה	

(הערה: רשימה זו אינה ממצה, אם אינכם בטוחים האם ניתן להשתמש במוצר זה, אנו ממליצים להתייעץ עם רופא)

● לאחר השימוש במוצר, עלולות להיגרם תופעות הלוואי הבאות:


1/ כוויות בעור	3/ בצקת ושלפוחית של זקיקי שיער	5/ גירוד וכאב
2/ אדמומיות ונפיחות מקומיים	4/ אריתמה ופיגמנטציה	6/ צלקת

(הערה: הרשימה אינה ממצה; אם אתם חווים אי נוחות אחרת, מומלץ להתייעץ עם שירות לקוחות או רופא)

⚠ תשומת לב


1. אין להשתמש במוצר לטיפול במחלות
 2. לא מומלץ להסיר שיער לבן או אפור
 3. לעור כהה טבעי, נא לא להשתמש במוצר
 4. אל תחשוף את עצמך לשמש לפני הסרת שיער
 5. בעת השימוש בפעם הראשונה, אנא הקפד להתחיל מ-Gear 1 ולבחור אזור קטן על הזרוע שלך כדי לבדוק את תגובת העור
 6. וודאו שחלון האפילציה קרוב לעור בעת האפילציה, ולאחר מכן בצע פעולת האפילציה
 7. אין להשתמש בו בסביבה חשוכה
 8. למניעת כשל במכונה, נא לא להשתמש באור שמש ישיר
 9. אין להכות ולנער את המוצר באלימות
 10. אין לנתק את התקע מבלי לכבות אותו; אחרת זה עלול לגרום נזק למוצר
- הערה: בעת השימוש במכשיר הדפילטור, הקפד למקם את כניסת האוויר כלפי מעלה ואת מסך ה-LCD כלפי מטה, דבר המסייע לפיזור חום טוב יותר ולקירור של המסיר.

הערה: כשתסיים להשתמש במוצר, אנא פנה את פתח האוויר כלפי מעלה ואת חלון הטיפול כלפי מטה לפיזור חום וקירור טובים יותר.

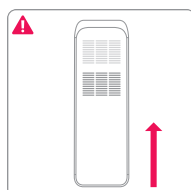


- המוצר, בניגוד למכשירים להסרת שיער בהירים חמים בקצה קעור, מאמץ את טכנולוגיית קירור מגע ספיר קלינית. טכנולוגיית קירור הקרח בספיר המוגנת בפטנט של Ulike מקררת את העור ביעילות, מפחיתה חום, מונעת כוויות ומגינה טוב יותר על מחסום העור. בזמן הסרת שיער, קצה הספיר השטוח דוחס את העור, לוחץ על זקיקי השיער כדי לקרב שורשים לאזור עם אנרגיה גבוהה יותר, ובכך לשפר את יעילות ספיגת האנרגיה של זקיקי השיער. קצה הספיר השטוח קל לניקוי ומעביר אור ביעילות כדי להשיג תוצאות טובות יותר להסרת שיער.
- משך חיי המנורה הארוך והרב-גוניות של מוצר זה אומר שאין צורך להחליף אותו והוא מתאים לאזורים מרובים (כגון פנים, שפתיים, בית השחי, קווי ביקיני, ידיים, רגליים וכו') כדי לחסוך בעלויות יקרות של החלפת ראש מנורה. אתה לא צריך לקנות אביזרים לעתים קרובות או לדאוג לעמלות נוספות. בנוסף, מוצר זה נועד לסנן ביעילות אורכי גל קצרים לא יעילים ואור מזיק עם מסנן ברמה הגבוהה ביותר.

הרכב המוצר

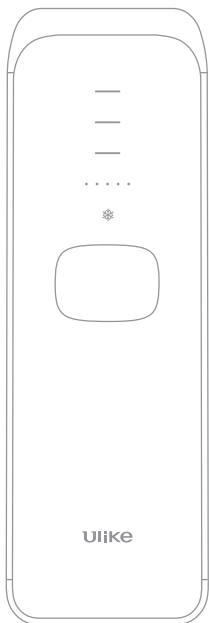

יחידה ראשית

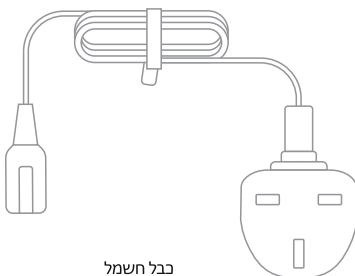

כבל חשמל




שנאי כוח





מדריך למשתמש





משקפי בטחיות IPL

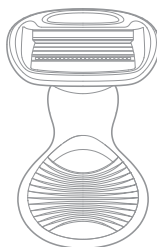


להב

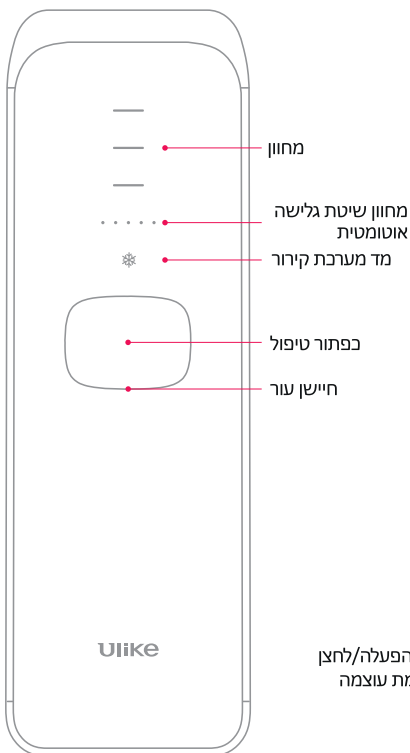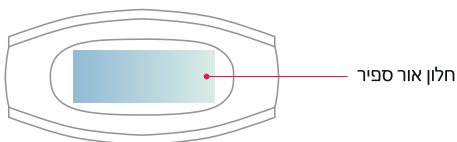

לחצן הפעלה/לחצן התאמת עוצמה

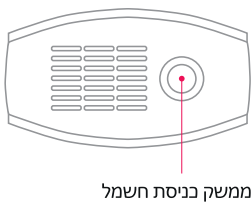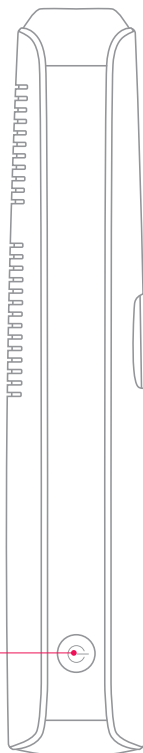

הכנה לפני השימוש

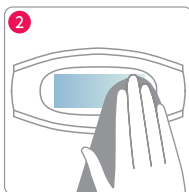

① נקה היטב את העור כדי להבטיח שהוא נטול שיער, יבש לחלוטין וללא חומרים שומניים. (שאריות כגון קרמים, דאודורנטים ומסנני קרינה)

② בדוק שאין לכלוך, שיער או לכלוך אחר על מקום ההקרנה, ושאין דק או חריגה. אם יש לכלוך, נא לנקות אותו כדי למנוע כשל במוצר, הידרדרות ובעיות עור.

③ לאחר שעתיים של בדיקת עור אם אין חריגות (אדמומיות, שלפוחיות) באזור המוקרן, אתה יכול להשתמש בבטחה במוצר זה. לא ממליצים על הסרת שיער עד לסיום בדיקת החשיפה לעור.

הגדר את עוצמת החשיפה

מוצר זה מציע 3 מצבי אנרגיה, שיכולים לענות על הצרכים של דרגות שונות של רגישות עור וצבעי שיער גוף שונים. להלן הנחיות הקשורות:

• מצב:

מצב רך: מתאים לחלקים רגישים כמו שפתיים, אנשים עם עור כהה ועור רגיש וכו'.
מצב גוף: מתאים לאיברי גוף של אנשים עם שיער עבה בקשיות בינונית או נמוכה, כמו ידיים, רגליים וכו'.

מצב חזק: מתאים לאיברי גוף של אנשים עם שיער עבה וקשה, כמו ידיים, רגליים וכו' (בשל העוצמה הגבוהה יותר של מצב חזק, ייתכן שתרגיש חם יותר ממצב רך ומצב גוף, אבל זה לא כשל במוצר)


• אנא עיין בטבלה למטה כדי לבחור מצב המתאים לאופי העור ולצבע השיער שלך:

צבע עור \ צבע שיער						
	לבן	בז'	חום בהיר	חום בינוני	חום כהה	חום שחור וכהה יותר
לבן/אפור	✗	✗	✗	✗	✗	✗
אדום	✗	✗	✗	✗	✗	✗
זהוב חיוור	✗	✗	✗	✗	✗	✗
זהב/בהיר	מצב רגיל מצב עוצמתי	מצב רגיל מצב עוצמתי	מצב רגיל מצב עוצמתי	מצב רך מצב רגיל	✗	✗
חום	מצב רגיל מצב עוצמתי	מצב רגיל מצב עוצמתי	מצב רגיל מצב עוצמתי	מצב רך מצב רגיל	✗	✗
חום כהה	מצב רגיל מצב עוצמתי	מצב רגיל מצב עוצמתי	מצב רגיל מצב עוצמתי	מצב רך מצב רגיל	✗	✗
שחור	מצב רגיל מצב עוצמתי	מצב רגיל מצב עוצמתי	מצב רגיל מצב עוצמתי	מצב רך מצב רגיל	✗	✗


(Note: X means not applicable)

אם אתה מרגיש כאב או אי נוחות במהלך השימוש, אנא השתמש במצב אחר (אם אתה מרגיש חום או צריבה קלה ללא כאב, זה תקין). לאנשים בעלי צבעי עור כהים יותר קיימת נטייה לאלרגיות עור, ולכן מומלץ להשתמש במצב Soft Mode או Body Mode יש להתחיל עם Soft Mode בפעם הראשונה.


ביצד להשתמש

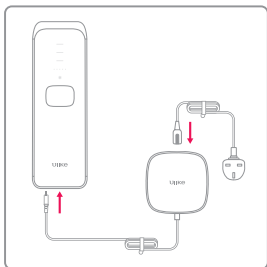


2. חבר את כבל החשמל לשנאי,
חבר את כבל החשמל לחיבור
אספקת החשמל בגב המוצר.

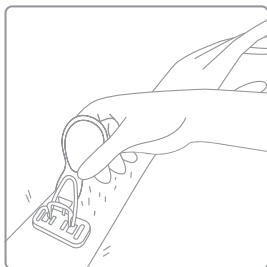


1. השתמש בלהב כדי להסיר שיער
מאזורי הגוף הזקוקים לטיפול. נא לא
להשתמש בו ישירות במגע עם
העור. היעזרו בקצף, או גלחו בעת
מקלחת. הלהב חד, השתמש בו
בהירות כדי למנוע שריטות.

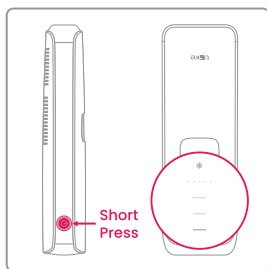


4. לחץ לחיצה קצרה על Power
On/Off בצד היחידה הראשית כדי
להפעיל את המוצר, ורמת האנרגיה
ופונקציית הקירור יוצגו עם הפעלת
המוצר.

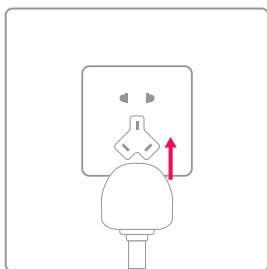


3. לאחר חיבור כבל החשמל לחיבור
אספקת החשמל של המוצר, הכנס
את התקע לשקע חשמל.

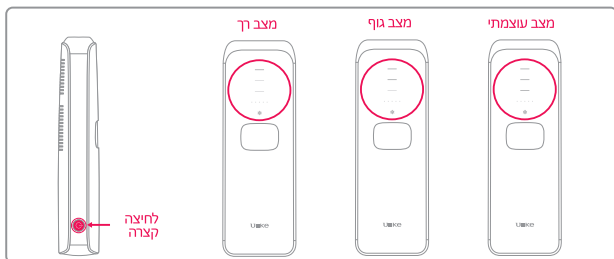


5. למוצר שלושה מצבים. לחיצה קצרה על מתג הפעלה/כיבוי/מצב בצד היחידה הראשית כדי להפעיל את המוצר ולעבור למצב הסרת השיער שאתה צריך. המצב ישתנה בסדר הבא: מצב רך - מצב גוף - מצב עוצמתי - מצב גוף - מצב רך.

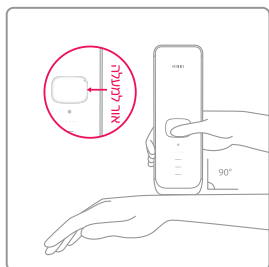

7. הנח את יציאת האור על האזור המיועד לטיפול על העור והתאים את העור בצורה אנכית. המנורה הלבנה של מנורת חיישן הסרת השיער תידלק, מה שמצביע על מגע מלא. לחץ על מקש ההבזק והתחל את פעולת הסרת השיער. אם המנורה הלבנה לא דולקת, מה שמעיד על כך שמחזיק המנורה אינו יוצר קשר מלא עם העור, והמכשיר לא יזרח

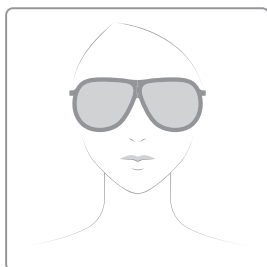


6. הרכיבו משקפי מגן לפני הסרת השיער כדי להגן על העיניים.

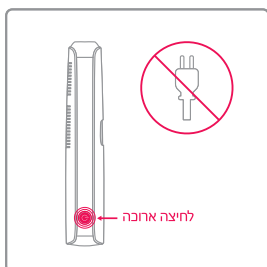

8. לאחר סיום תהליך הסרת השיער, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה/כיבוי למשך 1.2 שניות כדי לכבות את המכונה (אל תנתק אותה ישירות מבלי לכבות את המכונה כדי למנוע נזק).


- שיטת גלישה אוטומטית (עבור אזורים גדולים כגון ידיים, רגליים):

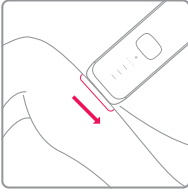

הנח את שקע האור על האזור להיות מטופל ונותן לו מגע מלא עם העור. בשלב זה, נורית החיווי של חיישן הסרת השיער תידלק, מה שמציין שראש המנורה יוצר קשר מלא עם העור. לחץ לחיצה ארוכה על הכפתור המהבהב למשך 1.2 שניות ונורית חיווי ההפעלה המתמשכת תידלק. מצב הפעלה מתמשך חכם יופעל.



אנא השאר את שקע האור במגע עם העור. הבזקים ייפלטו במרווח מסוים. אנא המשיכו להזיז את המוצר. הזיזו אותו קדימה ואחורה פעמיים על האזור המיועד לטיפול כדי להבטיח שהאזור מכוסה באופן שווה ולהימנע מחוסר אור. טיפ: ניתן להתאים את מהירות התנועה בהתאם למהירות ההבהוב, כך שהמוצר יוכל לכסות את האזור בצורה שווה יותר. תדירות ההבהוב גבוהה יותר במצב רך ומעט נמוכה יותר במצב גוף. יתר על כן, ככל שהרמה גבוהה יותר, האור ייפלט לאט יותר.

- שיטת ספוט (מתאימה לאזורים קטנים כגון אצבעות ושפתיים עליונות):

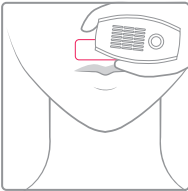

הנח את שקע האור על האזור המיועד לטיפול ותן לו ליצור קשר מלא עם העור. נורית החיווי של חיישן הסרת השיער תידלק בשלב זה, מה שמציין שראש המנורה יוצר קשר מלא עם העור. לחץ קצר על הכפתור המהבהב כדי להתחיל בהסרת שיער. הזז את ראש המנורה לאזור הבא, המתן לנורת החיווי של חיישן הסרת השיער הלבן,

ולאחר מכן לחץ שוב על הלחצן המהבהב כדי לחזור על הפעולה לעיל לפי הסדר. טיפ: אם אתה מתחיל להרגיש חום מוגזם על העור שלך במהלך תהליך הסרת השיער, השהה לכמה שניות כדי לתת לשקע האור להתקרר שוב לפני השימוש שוב במוצר.

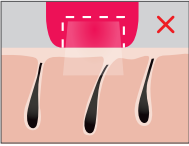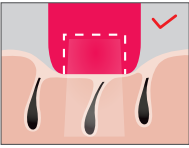

1. עקב הבזקים מתמשכים, מוצר זה יתחמם. על מנת לשמור על אפקט קירור אופטימלי, אנו ממליצים להשתמש בחלון האור על אזור המטרה כ-30 שניות לאחר הסרת השיער לפני המעבר לאזור הבא.

2. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, לחץ את חלון האור בחוזקה כנגד העור שלך כך שראש המנורה יתחבר במלואו. בדרך זו המכשיר יכול לקרר את העור מראש, להפחית חום, ולהגן טוב יותר על מחסום העור.

תדירות שימוש

שבועות 1-4
3 פעמים בשבוע

מ-5 שבועות
כל חצי או חודש

השתמש 3 פעמים בשבוע במשך השבועות 1-4;
השתמש כל חצי או חודש מ-5 שבועות.

הערה: נא להשתמש בו מספר פעמים בהתאם לצמיחת השיער. שיער עבה מדי ניתן להגדיל בצורה מתאימה בהילוך ובתדירות בהתבסס על זה, המצב הספציפי משתנה מאדם לאדם.

טיפול לאחר השימוש

- אמצעי זהירות שיש לנקוט לאחר הסרת השיער עם מוצר זה
- אנו ממליצים להימנע מכך שהאזור המטופל בא במגע עם מים למשך 6 שעות לאחר הסרת השיער. לאחר מכן, תוכל להרטיב את אזור הטיפול.
- נא לא להשתמש בבשמים, במסכות פנים או במוצרי קוסמטיקה המכילים חרוזי פילינג על האזור המטופל לאחר הסרת השיער.
- נא להימנע מחשיפה לאור אולטרה סגול למשך 48 שעות לאחר הסרת השיער. יש למרוח קרם הגנה לפי הצורך.
- שיזוף מלאכותי אסור בזמן תהליך הסרת השיער זה.
- אם אתם זקוקים לניתוח פלסטי באזור המטופל להסרת השיער, נא להתייעץ עם רופא.
- אם אתה חווה אי נוחות, אנא הפסק את השימוש במוצר והתייעץ עם רופא.

לתוצאות מיטביות וכדי למקסם את חיי השירות של המוצר, נא לנקות את המוצר לפני ואחרי כל שימוש כדי למנוע הצטברות שיער ואבק. חוסר תחזוקה נאותה של מוצר זה ישפיע לרעה על הפונקציונליות והיעילות שלו.

- לפני ניקוי המוצר, תחילה עליך לכבות אותו, לנתק אותו ולתת למכשיר להתקרר.
- השתמש במטלית רכה, נקייה ויבשה כדי לנגב את המראה של חלון האור.
- אחסן את המוצר בסביבה יבשה ונטולת אבק בין 10- ל-55 מעלות צלזיוס.
- אין לשטוף את המוצר והאביזרים שלו מתחת לברז או במדיח כלים.



- אין להשתמש בכדורי פלדה, בחומרי ניקוי שוחקים (משחת שיניים וכו') או בנוזל מאכל (בנדין, שמן מנוע, אצטון וכו') לניקוי המוצר.

הערה: אם אין מספיק מים לניקוי המוצר, ניתן להשתמש בכמה טיפות של אלכוהול בריכוז גבוה (נמוך מ-95%) כדי לנגב את החלקים.

סילוק בטוח לסביבה

בעת השלכת מוצר זה, נא לא לכלול אותו עם פסולת ביתית כללית. במקום זאת, נא לשלוח אותו למרכז מיחזור ייעודי.



שאלות נפוצות

סעיף זה מתאר את הבעיות שאתה עלול להיתקל בהן בעת השימוש במוצר זה. אם אינך יכול לפתור בעיה עם הפתרונות שסופקו, אנא צור קשר עם מרכז שירות הלקוחות של Ulike במדינה/אזור שלך.

- אם מתרחש מצב חריג או שלא ניתן לתקן פגם, אנא פנה למחלקת שירות הלקוחות לאחר המכירה.
- נא לשמור את חשבונית הרכישה ותעודת האחירות. תצטרך לספק תיעוד זה אם המוצר נכשל.

מכשיר זה עומד בתקנים

EN 55014-1

EN55014-2

EN 61000-3-2

EN61000-3-3

EN 62233

EN 60335-1

EN 60335-2-23

IEC 60335-2-113

IEC 62471

תקלות ופתרונות

	סיבה אפשרית	
בדוק אם החשמל מחובר לחשמל	חשמל לא מחובר	לא מצליח לאתחל
המתן עד שהמכונה תתקרה לפני השימוש בה. החזק את המארח קרוב לעור עד שמחונן האור נדלק	האם הטמפרטורה של ראש המארח והגוף גבוהים מדי האם הראש קרוב לעור	לא מסוגל לפלוט אור
בדוק אם ספק הכוח תקין תקן או החזר את המוצר מיד	מגע רע במכונה	מחונן העבודה כבוי
נגב מסנן גילוח שיער והפחת עוצמת האור	המסנן מזוהם שאריות שיער על פני הגוף	ריח מופיע כאשר מהבהב
לפני השימוש במוצר זה, נא לגלח את השיער להקרה. אם הגילוח גורם לגירוי בעור, חתוך את שיערך קצר ככל האפשר והשתמש בתנוחת אירינה נוחה	לא גולח השיער לפני	
אל תשתמש במוצר במקומות כגון הנרתיק, פי הטבעת, הפטמות והפין. גברים אין להשתמש במוצר זה על הפנים.	באתר להסרת שיער חל איסור להשתמש במוצר זה	כאב בלתי נסבל במהלך הסרת שיער
הפחת את עוצמת האור לרמה נוחה	עוצמת האור גבוהה מדי	
התיקון יחזיר את המוצר מיד	חלון העברת האור פגום	
השתמש בגל אלורה כדי להרגיע את העור או השתמש בראש מנורת ספיר להרגעת הקרח	אדמומיות קלה היא נורמלית ואינה מזיקה לגוף, והיא תדעך בקרב	לאחר השימוש, אזור הסרת השיער הופך לאדום
אנא בחר הילוך גבוה יותר בפעם הבאה	אתה משתמש ברמת עוצמת אור נמוכה מדי עבורך	
מהבהב בסמיכות וצריכה להיות חפיפה מסוימת בין אזורי ההבוק	חסרים אזורי הבוק באזור הסרת השיער	
אם השיער שלך בלונדיני חיוור, אפוא, אדום ולכן, החשיפה לא תהיה יעילה	למכשיר זה אין השפעה על צבע השיער שלך	אפקט הסרת שיער לא מספק
כדי להסיר בהצלחה את כל השיער, אנו ממליצים לך לעקוב אחר הנחיות ההקרה המומלצות	תדירות לא מספקת של שימוש בצידוד זה	
יש להשתמש במוצר זה ברציפות לפחות 5 חודשים, מכיוון שהוא עדיין יכול לדכא את התחדשות השיער במהלך תקופה זו	התגובה שלך לחשיפה לאור איטית	
כבה את המכשיר ותן לו לעמוד, ולאחר מכן תן לו להתקרה לפני השימוש בו	יכול להיות בגלל פעולת המכשיר לטווח ארוך יכול להיות בגלל פעולת המכשיר לטווח ארוך	המוצר הופך חם ולח במהלך השימוש

תקנות אחריות

• תקופת האחריות של מוצר זה עשויה להשתנות בהתאם לחוקי המדינה בה הוא נמכר.

• תקופת האחריות של מוצר זה, ככל החשמל והאביזרים הכלולים היא שנה אחת מתאריך הרכישה.

• אם יש למוצר בעיות איכות במהלך תקופת האחריות, Ulike תתקן או תחליף אותו ללא תשלום. עם זאת, נזק שנגרם משימוש לא נכון אינו מכוסה על ידי האחריות. במקרה כזה Ulike תחליף את החלק הפגום או את המכשיר הישן במחיר המקורי. המכשיר הישן יוחזר ל-Ulike.

• הצג את תעודת האחריות שלך בזמן שאתה זקוק לשירות. תקופת האחריות של המוצר מבוססת על התאריך שבו קניתם אותו. אם אין תאריך רכישה זמין, תקופת האחריות תחושב על סמך תאריך הייצור.

במקרים הבאים, ייתכן ש-Ulike לא תספק שירות אחריות, החזרים או החלפות. Ulike אינה אחראית להנפקה מחדש של חשבונית הרכישה ותעודת האחריות. נא לשמור את חשבונית הרכישה ותעודת האחריות שלך.

1. נזק למוצר שנגרם כתוצאה מאירועים בלתי צפויים כגון שריפה, רעידת אדמה, שיטפון וכו'.

2. כשל מוצר ונזק שנגרמו מרשלנות, שימוש לרעה או שימוש בתנאים חריגים.

3. נזק למוצר שנגרם מפירוק לא מורשה ואחסון לא תקין (כגון נזק למכרסמים או חדירת נוזלים).

4. נזק למוצר שנגרם כתוצאה משימוש במוצר בניסיונות בלתי הולמות, לרבות אך לא רק עומס עבודה מופרז.

5. נזק למוצר שנגרם מתנאים אחרים ש-Ulike לא יכולה לשלוט בהם.

6. בגין נזקים הקשורים לתפקוד או לשימוש במוצר זה (כגון אובדן הטבות עסקיות, הפרעה עסקית, הפסדים אחרים שנגרמו מהשימוש במוצר, עלויות החלפת ציוד, מכשירים או שירותים הקשורים לשימוש במוצר זה, טוענת לקוחות וכו'), Ulike לא נוטלת אחריות.

בהתאם לסוג והיקף התאונות, Ulike תישא באחריות מתאימה בהתאם לחוקים ולתקנות הרלוונטיים.

פרמטרים בסיסיים

סדרת Air	נתונים	
	IPL Hair Removal Device	שם המוצר
	UI06	דגם מוצר
	179*58*34mm	גודל מוצר
	24V $\approx$ 2.8A	רמת מתח
	67.2W	כוח
	3 levels	רמת אנרגיה
	$3.3\text{cm}^2 \pm 0.25\text{cm}^2$	גודל נקודה
	550-1200nm	טווח
	1.12ms-7.44ms	משך מחזור
	0.33Hz-2.5Hz	קצב חזרת מחזור
	Shenzhen Ulike Smart Electroics Co., Ltd	יצרן
	810, Building 1, Xunmei Science and Technology Plaza, No. 8 Keyuan Road, Science Park Community, Yuehai Sub-District, Nanshan District, Shenzhen 518000, Guangdong, P.R. China	כתובת
	EN 60335-1; EN 60335-2-23; EN 62233; EN IEC 55014-1; EN IEC 55014-2; EN IEC 61000-3-2; EN IEC 61000-3-3; IEC 60335-2-113; BS EN 60335-2-23; BS EN 60335-1; BS EN 62233; BS EN 55014-1; BS EN 55014-2; BS EN IEC 61000-3-2; BS EN 61000-3-3	תקנים

דרישות אחסון ויבוא		דרישות תפעול	
טמפרטורת אחסון	-10-55°C	טמפרטורת תפעול	5-30°C
רמת לחות	$\leq 90\% \text{RH}$	רמת לחות	$\leq 80\% \text{RH}$
לחץ יחסי	50-106 kPa	לחץ יחסי	80-106kPa

מספר חשבונית	שם החנות:	תאריך רכישה:
מספר סידורי:	דגם:	שם היצרן:
E-MAIL:	טלפון:	שם הלקוח:
כתובת:		

BDK GROUP בע"מ, (להלן "החברה") אחראית בזה בפני הרוכש (להלן "הלקוח") לפעולתו התקינה של המכשיר (להלן "המוצר") לפי הפרטים המצוינים לעיל, בכפוף לתנאים כדלקמן:

האחריות למוצר היא לתקופה של 12-3 חודשים מיום הרכישה בכפוף לחוק הגנת הצרכן | אחריות תקפה רק בציורף חשבונית רכישה | האחריות למתן שירות באמצעות החברה בלבד ו/או מעבדות שירות מטעמה | הובלת המוצר למעבדה היא באחריות הלקוח בלבד, במידה ויבקש להשתמש בשירותי ההובלה של החברה, הוצאות ההובלה יחולו על הלקוח | האחריות כוללת תיקון ללא תמורה של קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות ולהחליף, במידה ויידרש, את המוצר כולו או חלק ממנו | אין אחריות חלה במקרה של שבר או נזק | אחריות על סוללה 6 חודשים, אחריות על מטען 3 חודשים.

האחריות לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:
התקלה במוצר היא עקב שימוש לא מתאים, או שימוש שלא למטרה, או בניגוד להוראות, או תקלות שמקורן במתח חשמל, או כל חיבור חשמלי שלא סופק על ידי החברה | המוצר תוקן או טופל על ידי גורם אשר אינו מאושר מטעם החברה | בכל מקרה, בין אם בזדון ובין אם הקלקול נובע מרשלנות, כוח עליון, שפיכת נוזלים, קורוזיה, שבר, חשיפה לשמש ו/או לטמפרטורות קיצוניות, התפוצצות | האחריות לא חלה על אביזרים נלווים כגון: כיסויים, סוללות, אוזניות, מגני מסך, כבלים, נרתיקים, רמקולים ניידים וכד.

אם במהלך תיקון יתגלה כי הקלקול נגרם באחת מן הנסיבות המוזכרות לעיל ו/או בקשר עם ליקוי או אי התאמה בתוכנה, הרוכש ישלם עבור שעות העבודה שידרשו ואביזרים שיעשה בהם שימוש או תיקון בהתאם למחירון החברה שיהיו בתוקף במועד המדובר. בשום מקרה לא תהיה החברה אחראית למידע אשר נמצא על המכשיר לרבות רשימת אנשי קשר, תמונות, קבצי מדיה ואפליקציות שנרכשו באחריות הלקוח לגבות מידע זה טרם הבאת המכשיר לתיקון.



לקבלת האחריות על המוצר יש לסרוק את ה-QR ולמלא את פרטיך. ניתן גם להירשם ישירות באתר החברה www.bdk-group.com בלשונית הרשמה לאחריות.

Ulike

ulike.co.il



Scan me!

הביאו את סלון היופי אל הספה שלכם

