


Ulike

מסכת פנים LED של ReGlow

מדריך למשתמש

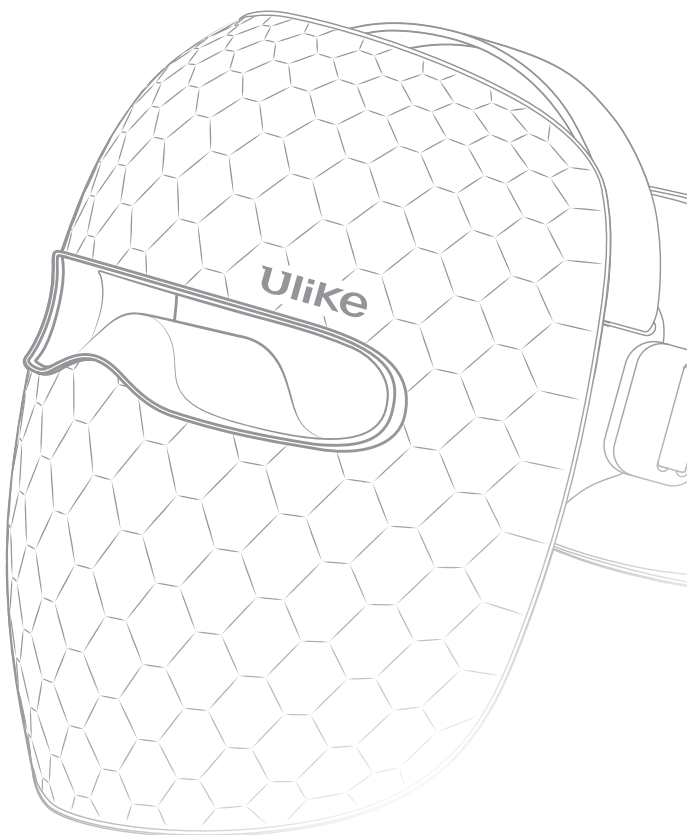

אנא קרא מדריך למשתמש זה בעיון לפני השימוש במוצר.

תודה שבחרת במוצר שלנו. כדי להבטיח שימוש
בטוח ונכון, אנא קרא בעיון מדריך זה ופעל לפי
הוראותיו. התמונות במדריך זה הן להמחשה בלבד,
אשר עשויות להיות שונות מהמוצר בפועל.

● הערות חשובות

- נא להרכיב ולהשתמש במוצר בהתאם למדריך למשתמש.
- אנא קרא בעיון את המדריך למשתמש ושמור אותו לעיון עתידי.
- אם יש לך שאלות או חששות במהלך השימוש, אנא צור קשר עם תמיכת הלקוחות המקוונת שלנו.

- ! סכנה: שימוש לא נכון במכשיר זה עלול לגרום לפציעה.
- ! זהירות: שימוש לא נכון במכשיר זה עלול לגרום לפציעה או לנזק לרכוש.
- ⓪ אזהרה: שימוש לא נכון במכשיר זה עלול להוביל למצבים מסוכנים.
- ⓪ זהירות: שימוש לא נכון במכשיר זה עלול לגרום לפציעה או לנזק לרכוש.

⓪ אזהרה

אין להשתמש במכשיר בתנאים הבאים. אי ציות עלול לגרום לתאונות או נזק לעור ולגוף.

- אם יש לך קוצב לב, דפיברילטור או מכשיר רפואי אחר שהושתל.
- אם אתה תחת השפעת אלכוהול, סמים או תרופות שעלולים לפגוע בכושר השיפוט שלך או ביכולת להפעיל את המכשיר בבטחה.
- אם יש לך תחושה מופחתת או לקויה של טמפרטורה או כאב באזור היישום.
- אם יש לך מחלה אוטואימונית.
- ✘ אם עברת ניתוח במהלך השבועיים האחרונים, התייעץ עם הרופא שלך לפני השימוש במכשיר. לפני השימוש במכשיר זה, התייעץ עם איש מקצוע רפואי אם יש לך אחד מהמצבים הבאים. שימוש במכשיר זה ללא התייעצות מתאימה עלול לגרום נזק לעור ולגוף.
- מחלה חריפה, מחלה זיהומית, גידול ממאיר, לחץ דם גבוה, מחלת דם, חום או מחלת חום.
- פגיעה חושית עקב הפרעה חמורה במחזור הדם ההיקפי (כגון סוכרת), נזק עצבי, מחלת עור או אטופיק דרמטיטיס, או אם את בהריון או מניקה
- מצב של אשפוז בבית חולים ונטילת תרופות, מצב עור קיים מראש, כגון מבנה אלרגי או דלקת עור ממגע, או דאגה לגבי העור שלך בעת השימוש במכשיר זה.
- בצע את אמצעי הזהירות האלה כדי למנוע נזק אפשרי לעור ולגוף שלך.
- אין להשתמש במכשיר לפרק זמן ממושך או על אותו אזור יותר פעמים מהמומלץ.
- הפסק להשתמש במכשיר מיד אם אתה חווה אי נוחות או תופעות שליליות, כגון תגובה אלרגית, מחלת עור, דלקת עור אלרגית או עור רגיש.
- עקוב בקפידה אחר ההוראות במדריך למשתמש. אי ביצוע זה עלול לגרום להשפעות שליליות.
- מכשיר זה מכיל סוללה נטענת שעלולה להתחמם יתר על המידה, להתלקח או להתפוצץ אם לא מטפלים בו כראוי. כדי למנוע סיכונים אלה, פעל לפי הנחיות הבטיחות הללו.


- אין לטעון, להשתמש או למקם את המכשיר בקרבת להבה פתוחה והתקני חימום או בסביבות בטמפרטורה גבוהה.
- יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין להשתמש בילדים או לאפשר לילדים להשתמש במכשיר, מכיוון שהדבר עלול לגרום לתאונות או לפציעה.
- הימנע משימוש באנשים שאינם יכולים להביע את כוונותיהם, ואל תאפשר לנכים להשתמש במכשיר ללא השגחה שכן הדבר עלול לגרום לתאונות.
- השתמש רק לפי ההוראות במדריך זה.
- אין להשתמש בקרבת חומרים דליקים כגון אלוהול, מדלל, בנדין, מסיר לק או ספריי שיער מכיוון שהם עלולים לגרום לשריפה, להתחשמלות או לפציעה.

⚠️ זהירות

- אין להזיק, לעבד, לכופף בכוח, למשוך, לסובב או לאגד את הכבל. אל תניח חפצים כבדים על הכבל ואל תאפשר לו להיצטב בין חפצים אחרים מכיוון שהדבר עלול לגרום נזק לכבל ולגרום לשריפה או להתחשמלות.
- אל תשתמש בכבל טעינה פגום מסוג C או בשקע רופף כדי למנוע התחשמלות פוטנציאלית, קצר חשמלי או שריפה. התייעץ עם המפיץ או עם שירות לאחר המכירה אם יש צורך בתיקון.
- שמור על היחידה הראשית והמטען יבשים; אל תשטוף אותם במים.
- אין להשתמש בקרבת מקורות מים, או באמבטיה או במקלחת כדי למנוע התחשמלות פוטנציאלית, קצר חשמלי או שריפה.
- אין לפרק, לתקן או לשנות מכשיר זה בשום אופן מכיוון שהדבר עלול לגרום לשריפה, להתחשמלות או לפציעה. התייעץ עם המפיץ או עם שירות לאחר המכירה אם יש צורך בתיקון. השתמש במתאם התואם לתקנים לאומיים ובעל אישור CQC/CCC, עם מתח כניסה מדורג של DC 5V והספק מוצא הנעים בין 5W ל-15W.
- אל תשתמש במכשיר בזמן הטעינה.
- אל תניח את המכשיר ליד אש, תחת אור שמש ישיר או במקומות לחים כגון חדר האמבטיה. אין למקם בקרבת התקני חימום מכיוון שהדבר עלול לגרום להתחממות יתר, שריפה או אפילו פיצוץ. הפסק מיד את הטעינה במקרה של מצבים חריגים כגון עשן או רעש או ריח חריגים.
- אין להשתמש אם יש לך מצב עור חריג כמו פריחה, גירוי או גירוד. הימנע משימוש מופרז או מתמשך במכשיר
- הפסק את השימוש במכשיר ונתק אותו מיד מהשקע אם אתה מבחין בריח חריג או התחממות יתר חריגה. זה עלול להצביע על נזק למכשיר או על סכנת שריפה.
- לפני הטעינה, ודא שתקע החשמל והשקע נקיים מלחות כדי למנוע התחשמלות פוטנציאלית, קצר חשמלי או שריפה.
- הקפד לכבות את המכשיר כאשר אינו בשימוש או בעת ניקוי כדי למנוע התחשמלות פוטנציאלית, קצר חשמלי או שריפה.
- אל תשתמש במכשיר אם הוא ניזוק, נפל או נתון לפגיעה חזקה. הדבר עלול להשפיע על ביצועי המכשיר או לגרום לפציעה.
- אין לנגב את היחידה הראשית עם אלוהול, מדלל, בנדין, מסיר לק או כל ממיסים שעלולים לגרום נזק לפני השטח של המכשיר.

- הנח את המכשיר על משטח יציב וישר כאשר אינו בשימוש. הימנע מהפלת המכשיר או הכפיפה למכה שכן הדבר עלול לגרום לתקלה או לפגיעה.
- אם אתה רואה תגובה חריגה בעור במהלך או לאחר השימוש, הפסק את השימוש במכשיר והתייעץ עם רופא.
- אל תסתכל ישירות על נורות ה-LED כדי למנוע אי נוחות אפשרית בעיניים.
- במקרה של הפסקת חשמל, כבה את המכשיר ונתק אותו מיד מהשקע. זה ימנע תאונות או נזק למכשיר כאשר המתח ישוחזר.
- שימו לב למצב העור שלכם בזמן השימוש במכשיר. אם אתה מרגיש עייפות עור או תחושות חריגות כלשהן, הפסק להשתמש בו מיד. אם המצב נמשך למחרת, יש לפנות לרופא בהקדם האפשרי.
- אין להשתמש במכשירים על ידי:
 - אנשים הסובלים מכוויות שמש
 - אנשים בטיפול רפואי למחלות הכרוכות ברגישות לאור;
 - אנשים המקבלים תרופות רגישות פוטו
 - אנשים שיש להם קרוב משפחה מדרגה ראשונה עם היסטוריה של מלנומה;
- כאשר המכשיר נמצא בשימוש בחדר אמבטיה, נתק אותו מהחשמל לאחר השימוש מכיוון שקירבת מים מהווה סכנה גם כאשר המכשיר כבוי;
- יש לנקות את המכשיר כדי למנוע הצטברות של שומן ושאריות אחרות.
- מכשיר זה יכול לשמש ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים עם כושר גופני מוגבל,
- יכולות חושיות או שכליות או חוסר ניסיון וידע אם ניתנה להם השגחה או
- הדרכה בנוגע לשימוש במכשיר בצורה בטוחה ולהבין את הסיכונים הכרוכים בכך. ילדים לא ישחקו עם המכשיר. ניקוי ותחזוקת המשתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה.

תיאור המוצר ואביזרים

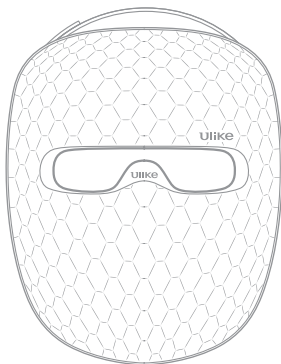

מסבת לד





שלט נטען




קבל טעינה מסוג C



מדריך למשתמש

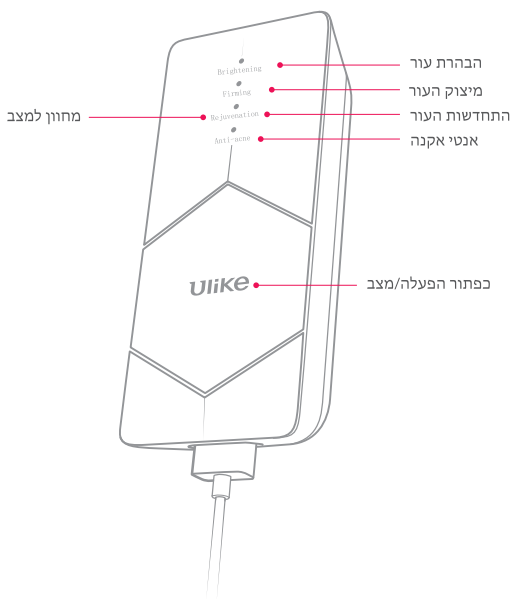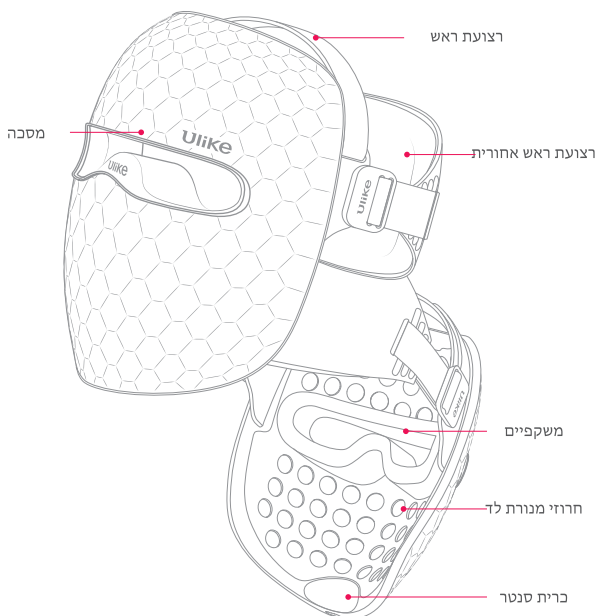

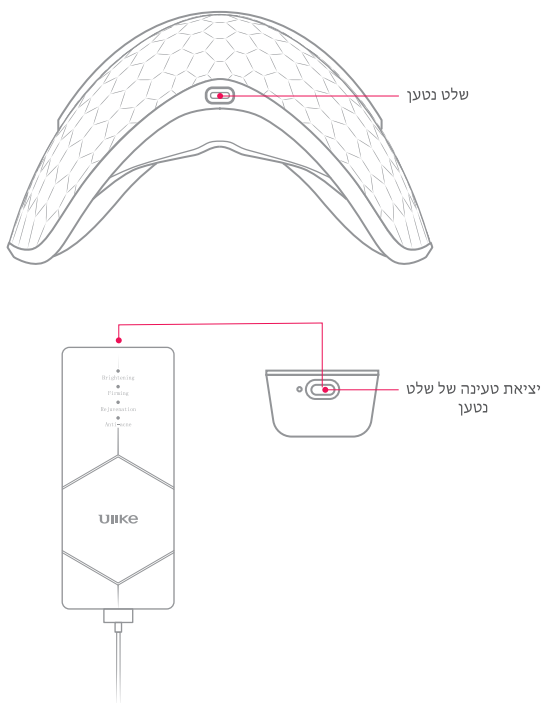

טעינת המכשיר

המכשיר מורכב ממסיכת LED ושלט נטען. אתה רק צריך לטעון את השלט הנטען, מכיוון שהוא יפעיל את היחידה הראשית באופן אוטומטי. כדי לטעון את השלט הנטען, חבר את כבל הטעינה מסוג C ליציאת הטעינה בשלט. חבר את הקצה השני של הכבל למתאם מתח תואם (לא כלול).

מחון הטעינה בשלט מציג את מצב הסוללה של המכשיר: כשהמכשיר פועל, נורית אדומה מהבהבת מציינת שהסוללה חלשה וצריכה טעינה. בזמן הטעינה, האור האדום נשאר קבוע. כאשר הסוללה טעונה במלואה, הנורית הופכת לירוקה.

כשהמכשיר כבוי, אתה יכול ללחוץ על לחצן ההפעלה כדי לבדוק את מצב הסוללה. אם הסוללה חלשה, מחון הטעינה יבהב באדום שמונה פעמים ואז ייכבה. זה אומר שאתה צריך לטעון את המכשיר. אם הסוללה מספיקה, מחון הטעינה יבהב בירוק פעם אחת ואז ייכבה.

כיצד להשתמש במכשיר



לפני השימוש במכשיר בפעם הראשונה

בדיקת זהירות


- בדוק את המכשיר והאביזרים. הוצא את היחידה הראשית והאביזרים מהקופסה. שמור את חומרי האריזה לצורך הובלה, אחסון והתייחסות עתידית. בדוק את היחידה הראשית ואת האביזרים לאיתור סימנים של נזק מכני. אם אתה מוצא נזק כלשהו, אל תשתמש במכשיר ופנה למפיץ או לשירות לאחר המכירה בהקדם האפשרי.

- בצע בדיקת רגישות לאור.


בדיקת רגישות לאור

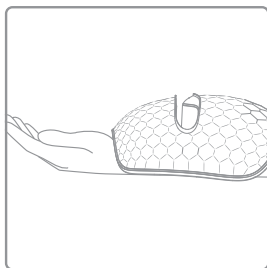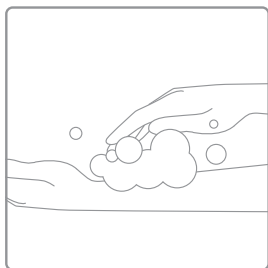


- נקו את הזרוע הפנימית עם סבון או תכשיר ניקוי פנים, יבשו אותה ולאחר מכן חשפו אותה לאור ממסכת ה-LED למשך 3 דקות. המתן 24 שעות ובדוק את העור שלך לאיתור מצבים חריגים, כגון אדמומיות מתמשכת, צריבה או חום. אם אין לך שום תגובה שלילית, אתה יכול להשתמש במכשיר על הפנים שלך. עם זאת, אם יש לך פריחה, אדמומיות, גירוד או תגובות חריגות אחרות לפני, במהלך או אחרי הבדיקה, הפסק מיד להשתמש במכשיר.

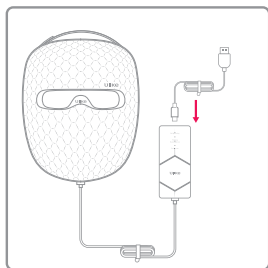


2. חבר את המסכה והבקר עם הכבל המצורף.

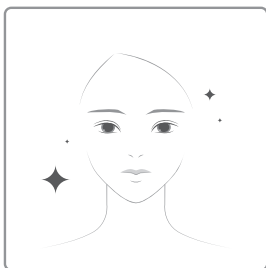

1. הסר את האיפור ונקה את הפנים לפני השימוש. יש למרוח טונר להענקת לחות בסיסית, אך היזהר לא להשתמש במוצרי טיפוח רגישים לאור או המכילים מרכיבי הלבנה.

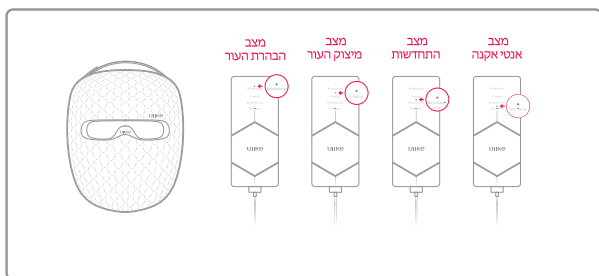

3. מכשיר זה כולל פונקציית זיכרון. כאשר תפעיל אותו, הוא יחזור למצב שבו השתמשת במהלך הפגישה האחרונה. בחר מצב בעת השימוש בו בפעם הראשונה. לחץ והחזק את לחצן ההפעלה/מצב בבקר למשך 1 עד 2 שניות כדי להפעיל את המכשיר. הטיפול יתחיל אוטומטית במצב הבהרת העור. לחץ על לחצן ההפעלה/מצב כדי לעבור בין מצבי הבהרת העור, מיצוק העור, התחדשות ומצבי אנטי אקנה.

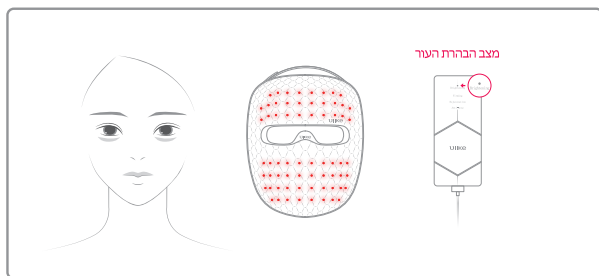


4. טיפול

• מצב הבהרת העור

אידיאלי לטיפול בהשפעת הלילות המאוחרים או לחידוש העור היומי כדי לנטרל גוון עור בהיר.


טיפים: לאחר הסרת האיפור והניקוי, הגדר את המכשיר למצב זה. לאחר הטיפול באור, יש למרוח מוצרי טיפוח מלבינים להשפעות משופרות. אין להשתמש במוצרים רגישים לאור או מגרים המכילים ויטמין C, רטינול (ויטמין A) או חומרים דומים לפני הטיפול באור.

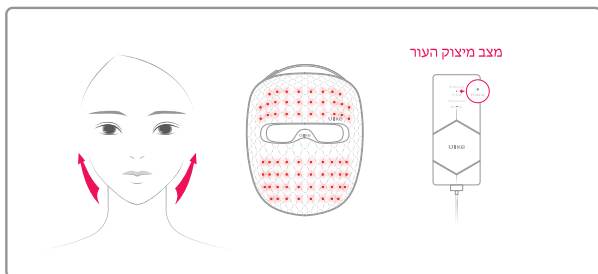

4. טיפול

- מצב מיצוק העור
אידיאלי למלחמה בסימני הזדקנות או הזדקנות מוקדמת.


טיפים: לאחר הסרת איפור וניקוי יש לעבור למצב זה לטיפול. לאחר הטיפול באור, יש למרוח מוצרי אנטי-אייג'ינג לשיפור התוצאות.

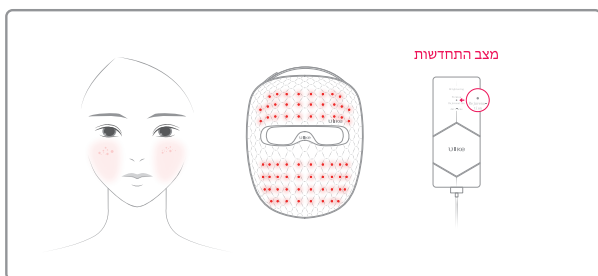

4. טיפול

- מצב התחדשות
אידיאלי להתאוששות מכובויות שמש, רגישות עונתית, הקלה באלרגיה או התאוששות לאחר ניתוח קוסמטי.


טיפים: לאחר פינוק העור עם תכשיר ניקוי עדין ללא גרניים, עבור למצב זה לטיפול. בתקופות רגישות שבהן מחסום העור שביק, הפוך את ההגנה מפני השמש לטקס יומיומי.

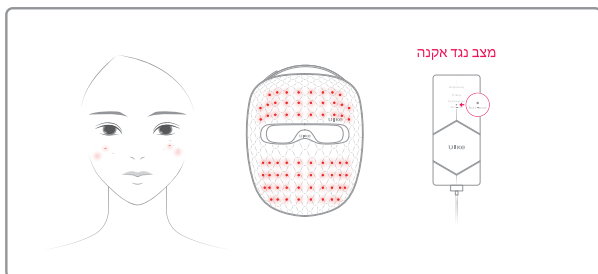

4. טיפול

- מצב אנטי אקנה
אידיאלי ליצירת איזון מושלם בין לחות ושמן, עידון נקבוביות סתומות או הפחתת אקנה.

טיפים: לאחר הסרת האיפור והניקוי, מרחו קרם לחות קל לפני הפעלת מצב זה. אם העור שלך מרגיש יבש לאחר הפגשה, הגבירו את הלחות עם מוצרי לחות נוספים. כמו כן, רצוי לשמור על אורח חיים בריא לתוצאות בולטות יותר.

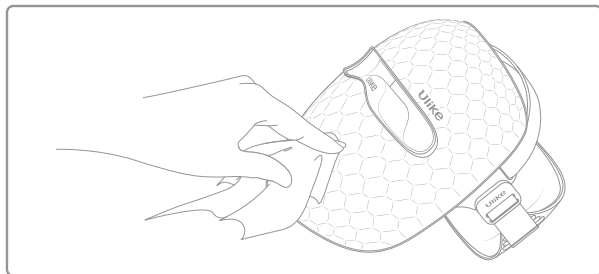

5. לאחר הטיפול הכנס את המכשיר בחזרה לקופסת האריזה או שקית האחסון. אם הוא מתלכלך, נקה אותו במטלית רכה לחה מעט או במגבון חיטוי. אין להשתמש באלכוהול, מדלל, בנזין, מסיר לק או כל ממיסים לניקוי המכשיר

6. תדירות השימוש השתמש עד 6 פעמים בשבוע, בבחירת המצב בהתאם למצב העור שלך. כל מצב מתוזמן להימשך 10 דקות, עם הצעה יומית כוללת של חשיפה של לא יותר מ-40 דקות.

טיפול ותחזוקה

I . ניקוי

- (1) לפני ניקוי המכשיר, כבו אותו והניחו לו להתקרר.
- (2) נגב את פני המכשיר עם מגבון לח ללא אלכוהול או רקמה רכה.
- הערה: אם מים לא עושים את העבודה, אתה יכול להשתמש במקלון צמר גפן או מטלית נקייה טבולה באלכוהול 75% איזופרופיל.
- (3) אין להשתמש בכדור תיל פלדה או בחומרי ניקוי מאכלים מכיוון שהם עלולים לגרום נזק למכשיר.
- (4) אין לנקות את המכשיר או אביזרים כלשהם במדיח הכלים או מתחת למים זורמים מכיוון שהם אינם עמידים למים.

II . אחסון

- (1) שמור את המכשיר יבש. אין לטבול את המכשיר או חלק מחלקיו במים כדי למנוע סכנת התחשמלות.
- (2) כדי למנוע נזק או אובדן של המכשיר והאביזרים שלו, אחסן אותם בקופסת האריזה לאחר כל שימוש. לפני האחסון, הקפד לנקות אותם היטב.
- (3) אם המכשיר אינו בשימוש במשך זמן רב, אחסן אותו במקום יבש וקריר הרחק מאור השמש. הימנע ממגע עם חפצים קשים כדי למנוע נזק למכשיר.
- (4) אין לאחסן את המכשיר והאביזרים שלו בסביבה לחה לתקופה ממושכת, שכן הדבר עלול להשפיע על ביצועי המכשיר.
- (5) בדוק באופן קבוע את המכשיר (כולל הכבל) עבור כל סימני נזק ברורים. במקרה של נזק או שבר, הפסק להשתמש במכשיר. כדי למנוע סכנת הסתבכות או מעידה, תמיד נתק את המכשיר מהחשמל כאשר אינו בשימוש.

III . דרישות אחסון והובלה

- טמפרטורת הסביבה: $10-60^{\circ}\text{C}$
- לחות יחסית: 10%-90%RH
- לחץ אטמוספרי: $50\text{kPa}\sim 106\text{kPa}$
- בתוך הבית עם גזים לא קורוזיביים ואוורור טוב.
- ההובלה כפופה לתנאים הקבועים בחוזה הרכישה. עם זאת, יש לנקוט באמצעי זהירות כדי למנוע פגיעות חמורות, רעידות, כמו גם חשיפה לגשם או שלג במהלך תהליך ההובלה.

שאלות נפוצות

ש: האם אני יכול להשתמש בו בחדר האמבטיה?
ת: לא, מוצר זה אינו עמיד למים, אז אל תשתמש בו בחדר האמבטיה או ליד מקורות מים.

ש: אני מרגיש תחושה חמימה על הפנים שלי לאחר השימוש. זה נורמלי?

ת: כן. תחושת החום היא השפעה נורמלית של הטיפול באור. זה אומר שהמכשיר מגרה את תאי העור שלך ומשפר את זרימת הדם שלך.

ש: מדוע העור שלי מרגיש יבש לאחר השימוש?

ת: טיפול באור עלול לגרום לעור שלך להתייבש. אתה יכול להשתמש במוצר טיפוח לחות כדי לחות לעור שלך לאחר השימוש במכשיר.

ש: האם אני יכול לשטוף אותו במים?

ת: לא. מוצר זה אינו עמיד למים, לכן אין לשטוף אותו במים מכיוון שהוא עלול להוביל לתקלה במכשיר.

ש: באיזו תדירות וכמה זמן עלי להשתמש במוצר?

ת: אתה יכול להשתמש במכשיר עד 6 פעמים בשבוע, בהתאם למצב העור שלך. ברגע שהעור שלך מתרגל למכשיר, אתה יכול להשתמש בו כל יום. מומלץ להשתמש במכשיר בבוקר לפני הנחת האיפור או בערב לאחר הניקוי. אתה יכול לבחור את המצב המתאים לצרכים שלך.

המכשיר יכבה אוטומטית לאחר 10 דקות בכל מצב, וניתן להשתמש במצבים שונים בתוך תקופה זו אם תרצה בכך.

✳ כדי למנוע טיפול מופרז ומזק למחסום העור, אין להשתמש במכשיר יותר מ-40 דקות ביום.

ש: האם אני יכול להתאפר בזמן השימוש במסכת LED?

ת: לא. עליך להסיר את האיפור ולנקות את הפנים שלך לפני השימוש במסכת LED. זה יבטיח שהעור שלך יהיה נקי משמנים ולכלוך, ושהאור יכול לחדור לעור שלך ביעילות רבה יותר.

ש: האם ניתן לקחת אותו ברכבות מהירות או במטוסים?

ת: כן. המכשיר בטיחותי ונייד, וניתן לקחת אותו איתך ברכבות מהירות או במטוסים. עם זאת, עליך לפעול לפי תקנות האבטחה והוראות רשויות התחבורה.

ש: האם יש לזה השפעה על העיניים?

ת: לא. האור הנפלט ממסכת ה-LED אינו משפיע על הראייה ואינו מזיק לגוף האדם. בנוסף, המשקפיים יכולים למנוע ביעילות אי נוחות הנגרמת מחשיפה לאור לעיניים.

מפרט מוצר

שם המוצר	מסכת פנים LED של ReGlow
דגם מוצר	UM10
קלט מדורג	5V1A
מידות	235.9*145 מ"מ
קיבולת סוללה	2600mAh
זמן טעינה	3 שעות
חיי סוללה	30-40 דקות
מצב	מצב הבהרת העור מצב מיצוק העור מצב התחדשות מצב נגד אקנה
אורך גל אור אדום	630 ננומטר 10 ננומטר
אורך גל של אור אינפרא אדום	830 ננומטר 10 ננומטר
אורך גל של אור צהוב	590 ננומטר 10 ננומטר
אורך גל אור כחול	415 ננומטר 10 ננומטר
יצרן	Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd.
כתובת	810, Building 1, Xunmei Science and Technology Plaza, No. 8 Keyuan Road, Science Park Community, Yuehai Sub-District, Nanshan District, Shenzhen 518000, Guangdong, P.R. China

תנאים סביבתיים

תנאי הפעלה		תנאי אחסון והובלה	
טמפרטורת הפעלה	10~40 °C	טמפרטורת אחסון	-10~60 °C
לחות	15%~80%RH	לחות	10%~90%RH
לחץ יחסי	70KPa~106KPa	לחץ יחסי	50KPa~106KPa

תנאי אחריות

- תקופת האחריות עבור מוצר זה עשויה להשתנות בהתאם למדינת המכירה, ואנו נשאף להאריך אותה היכן שהחוקים המקומיים מאפשרים זאת.
- תקופת האחריות למוצר זה היא שנה אחת מתאריך הרכישה.
- בכל מקרה של בעיות איכות בתקופת האחריות, Ulike תתקן או תחליף את החלקים הפגומים ללא עלות. עם זאת, דק שנגרם משימוש לא נכון או פעולות שאינן תואמות אינו מכוסה. במקרים כאלה, Ulike נותן לך את האפשרות להחליף חלקים פגומים במחיר המקורי או לבחור בטרייד-אין. הבעלות על החלקים המוחלפים או המכשיר הישן תעבור ל-Ulike.
- בבקשת שירות יש להציג את תעודת האחריות. תקופת האחריות למוצרי Ulike מתחילה מתאריך הרכישה. אם לא ניתן לספק הוכחת רכישה, תאריך הייצור כפי שנרשם על ידי Ulike ייחשב כתחילת תקופת האחריות.
- Ulike לא יוציא מחדש חשבוניות רכישה או תעודות אחריות. נא לשמור אותם כמו שצריך.
- ייתכן שתיוקן או החלפה במסגרת האחריות לא יחולו בנסיבות הבאות:
 - (1) דק שנגרם כתוצאה מאירועים בלתי צפויים כגון שריפה, רעידות אדמה או שיטפונות.
 - (2) כשלים או דק כתוצאה מרשלנות, שימוש לרעה או שימוש בתנאים חריגים.
 - (3) דק שנגרם על ידי פירוק ללא אישור או אחסון לא תקין (כגון דק על ידי מכרסמים או חדירת נוזלים).
 - (4) דק שנגרם משימוש במוצר בתנאי סביבה לא סטנדרטיים לרבות אך לא רק שימוש במוצר מעבר לעומס העבודה המומלץ.
 - (5) דק שנגרם ממצבים שאינם בשליטתה של Ulike.
- Ulike אינה נושאת באחריות לנזק תוצאתי הנובע מהפונקציונליות או השימוש במוצר זה, לרבות אך לא רק אובדן רווחים עסקיים, הפרעה בעסק, הפסדים אחרים שנגרמו מהשימוש במוצר זה, עלויות שנגרמו בהחלפת ציוד, מכשירים, או שירותים עקב השימוש במוצר, וכל תביעה מצד הלקוחות שלך.
- לגבי סוג והיקף האחריות הנבועים מאירועים בלתי צפויים, Ulike תפעל על פי החוקים והתקנות החלים.

מספר חשבונית:	שם החנות:	תאריך רכישה:
מספר סידורי:	דגם:	שם היצרן:
E-MAIL:	טלפון:	שם הלקוח:
כתובת:		

BDK GROUP בע"מ, (להלן "החברה") אחראית בזה בפני הרוכש (להלן "הלקוח") לפעולתו התקינה של המכשיר (להלן "המוצר") לפי הפרטים המצוינים לעיל, בכפוף לתנאים כדלקמן:

האחריות למוצר היא לתקופה של 12-3 חודשים מיום הרכישה בכפוף לחוק הגנת הצרכן | אחריות תקפה רק בצירוף חשבונית רכישה | האחריות למתן שירות באמצעות החברה בלבד ו/או מעבדות שירות מטעמה | הובלת המוצר למעבדה היא באחריות הלקוח בלבד, במידה ויבקש להשתמש בשירותי ההובלה של החברה, הוצאות ההובלה יחולו על הלקוח | האחריות כוללת תיקון ללא תמורה של קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות ולהחליף, במידה ויידרש, את המוצר כולו או חלק ממנו | אין אחריות חלה במקרה של שבר או נזק | אחריות על סוללה 6 חודשים, אחריות על מטען 3 חודשים.

האחריות לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:
התקלה במוצר היא עקב שימוש לא מתאים, או שימוש שלא למטרה, או בניגוד להוראות, או תקלות שמקורן במתח חשמלי, או כל חיבור חשמלי שלא סופק על ידי החברה | המוצר תוקן או טופל על ידי גורם אשר אינו מאושר מטעם החברה | בכל מקרה, בין אם בזדון ובין אם הקלקול נובע מרשלנות, כוח עליון, שפיכת נוזלים, קורוזיה, שבר, חשיפה לשמש ו/או לטמפרטורות קיצוניות, התפוצצות | האחריות לא חלה על אביזרים נלווים כגון: כיסויים, סוללות, אוזניות, מגני מסך, כבלים, נרתיקים, רמקולים ניידים וכד.

אם במהלך תיקון יתגלה כי הקלקול נגרם באחת מן הנסיבות המוזכרות לעיל ו/או בקשר עם ליקוי או אי התאמה בתוכנה, הרוכש ישלם עבור שעות העבודה שידרשו ואביזרים שיעשה בהם שימוש או תיקון בהתאם למחירון החברה שיהיו בתוקף במועד המדובר. בשום מקרה לא תהיה החברה אחראית למידע אשר נמצא על המכשיר לרבות רשימת אנשי קשר, תמונות, קבצי מדיה ואפליקציות שנרכשו באחריות הלקוח לגבות מידע זה טרם הבאת המכשיר לתיקון.

לקבלת האחריות על המוצר יש לסרוק את ה-QR ולמלא את פרטיו.
ניתן גם להירשם ישירות באתר החברה www.bdk-group.com
בלשונית הרשמה לאחריות.

Ulike

ulike.co.il



Scan me!

הביאו את סלון היופי אל הספה שלכם

