


Ulike

קירור קרח מכשיר להסרת שיער בשיטת IPL מדריך למשתמש

AIR סדרת

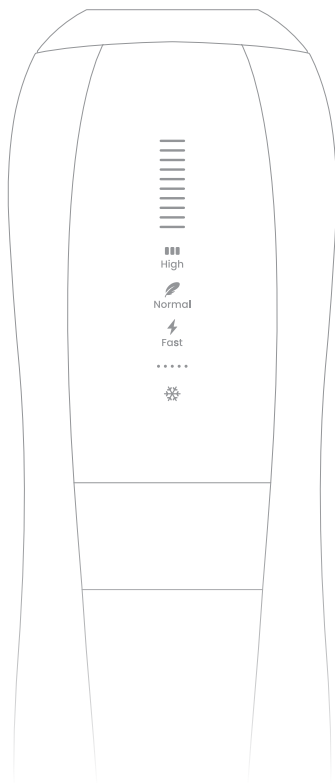

תודה שבחרת ב-Ulike.
Ulike, שנוסדה בשנת 2013, התמקדה במכשירי
הסרת שיער IPL ביתיים מהיום הראשון.
אנו מאמינים שהסרת שיער צריכה להיות חוויה
בטוחה,
חלקה וכמעט ללא כאבים.
והמכשיר הזה הולך להיות מערכת הסרת השיער
שאתה אוהב.

לפני השימוש במכשיר, אנא קרא בעיון את המדריך למשתמש,
כולל כל התוויות נגד, האזהרות ומידע הבטיחות, ושמור אותו לעיון עתידי.
האיורים במדריך זה הם לעיון בלבד.

אמצעי בטיחות

■ שים לב!

לא לכל אחד מתאים להשתמש במכשיר להסרת שיער IPL, אנא עיין במידע הבא בפירוט לפני השימוש במכשיר.

- אל תשתמש במכשיר על עור שיש בו כוויות, קעקועים או צלקות כדי למנוע פציעה.

- אל תשתמש במכשיר אם העור שלך השתזף באופן מלאכותי או טבעי לאחרונה או נשרף מחשיפת יתר לאור השמש. העור שלך עשוי להיות רגיש במיוחד בעקבות חשיפה ורגיש במיוחד לתופעות לוואי של הסרת שיער IPL (למשל כוויות בעור, שלפוחיות, שינוי צבע או צלקות).

- אל תשתמש אם אתה רגיש לאור שמש (רגישות לאור) או נוטל תרופות הגורמות לרגישות לצילום, למשל, אנטיביוטיקה מסוימת כגון טטראציקלין, NSAIDs כגון איבופרופן או רטינואידים כגון Accutane ו/או רטינואידים מקומיים כגון Retin A. תמיד בדוק את ההוראות המצורפות למוצרים הרפואיים שלך כדי לראות אם רגישות לאור מופיעה כתופעת לוואי. פנה לייעוץ רפואי אם אינך בטוח אם מתאים להשתמש במכשיר להסרת שיער IPL. שימוש במכשיר על עור רגיש לאור עלול לגרום לנזק לעור כולל שלפוחיות ונפיחות.

- אל תשתמש במכשיר אם יש לך היסטוריה של סרטן עור או נגעים טרום סרטניים (למשל נבי או מספר רב של שומות).

- אין להשתמש אם את בהריון, מניקה או במחזור.

- אל תשתמש במכשיר על אנשים מתחת לגיל 18. השפעות השימוש במכשיר בקבוצת גיל זו אינן ידועות.

■ אזהרה

- אל תשתמש במכשיר באזורים הבאים:

- אשכים, איברי מין ופטמות.

- כתמים חומים כהים או שחורים כגון כתמי לידה, שומות או יבלות.

- קעקועים או איפור עמיד.

- אזורים המושפעים ממחלות עור כגון פסוריאזיס, ויטיליגו, אקזמה, אקנה, הרפס סימפלקס, זיהומים פעילים או פצעים.

- אזורים שעברו ניתוחים פלסטיים.

- ליד או סביב העיניים.

- אל תחרוג מהשימוש המצוין במדריך זה. נזק לעור עלול להתרחש לאחר יישום ממושך או חוזר על פני השטח באתר אחד.

המכשיר פולט פעימות אור עזות במהלך הסרת שיער, וחשיפה ישירה עלולה לגרום לנזק לעיניים.

- אל תסתכל ישירות לתוך חלון האור כאשר המכשיר מופעל.

- אל תנסה להפעיל את המכשיר לכיוון העיניים.

- אל תטפל באזורים סביב העיניים, כגון גבות או ריסים.

מומלץ להרכיב משקפי מגן ולהסיט את המבט מהמכשיר בעת הפעלת כפתור התאורה. בנוסף, מומלץ להימנע מכך שכניסת האוויר פונה לכיוון העיניים במהלך הסרת השיער. זה מאפשר מגע נכון של המכשיר עם האזור שהוסר שיער, מה שמבטיח העברת אור יעילה תוך הגנה על העיניים מאור תועה.

בטיחות חשמל ואש

- אין לפרק, לתקן ולהרכיב מחדש את המוצר ללא נוכחות של צוות מקצועי שכן הדבר עלול לגרום לנזק, תקלה או פציעה אישית.

- שירות לאחר מכן מסופק על ידי מקום שירות מורשה. במידת הצורך, היצרן יכול לספק דיאגרמות מעגלים, רשימות חלקי רכיבים, תיאורים, הוראות כיול כדי לסייע לצוות השירות בתיקון חלקים.

- כל שינוי בלתי מורשה אסור, מה שעלול להוביל לסיכון בלתי מקובל.

- אין להשתמש אם המכשיר פגום או שבור; לדוגמה, בית סדוק, נזק לכבלים (חוטים פנימיים גלויים), חלון אור סדוק או שבור וכו'.

- אין להשתמש ליד אמבטיות, מקלחות, אגנים או כלים אחרים המכילים מים. אין להשתמש במכשיר אם הוא חשוף למים.

- אין להשתמש אם המכשיר מתחמם בצורה לא נוחה למגע.

- אל תנסה להפעיל (להבזק) את המכשיר על פני כל משטח מלבד העור.

- אין לחסום את פתחי האוויר משני צידי המכשיר.

- אל תבצע תחזוקה במהלך השימוש.

- אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה כשהוא מופעל כדי למנוע סכנת שריפה או כוויות.

- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות, או חוסר ניסיון וידע, אלא אם כן ניתנה להם השגחה או הדרכה בנוגע לשימוש במכשיר כדי למנוע סכנת שריפה או כוויות.

- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי ילדים. יש לפקח על ילדים כדי להבטיח שהם לא ישחקו עם המכשיר כדי למנוע סכנת שריפה וכוויות.

- אם כבל החשמל פגום, יש להחליפו על ידי Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd מרכז שירות מורשה על ידי Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd. או אנשים מוסמכים דומים על מנת למנוע סכנת התחשמלות.

- מים וחשמל הם שילוב מסוכן! כדי למנוע סכנת התחשמלות.

- אין להשתמש במכשיר זה בסביבה רטובה (למשל בחדר האמבטיה או ליד מקלחת או בריכת שחייה);
- אל תתנו למים לזרום לתוך המכשיר.

- בדוק אם המתח המצוין במכשיר מתאים למתח החשמל המקומי לפני חיבור המכשיר כדי למנוע סכנת התחשמלות או נזק ממושך למכשיר.

- אם לשקע הקיר המשמש להפעלת המכשיר יש חיבורים גרועים, התקע של המכשיר מתחמם. ודא שאתה מחבר את המכשיר לשקע קיר שהותקן כהלכה כדי למנוע סכנת שריפה וכוויות.

- אין לחשוף את המכשיר לזעזועים בדים כדי למנוע סכנת נזק למנורה.

- זהירות: נתק תמיד את המכשיר מהחשמל לאחר השימוש ובמקרה של הפסקת חשמל כדי למנוע סכנת נזק למכשיר.
- סיווג קבוצת הסיכון: קבוצה פטורה.

- הרחק את המכשיר ממון, אבק ואור, אחרת הביצועים יושפעו.

- הרחק את המכשיר מהישג ידם של ילדים וחיות מחמד.

- אין לחשוף אזורים שהוסרו שיער לשמש. המתן לפחות 48 שעות לאחר הסרת השיער לפני חשיפת העור המוסר לאור שמש ישיר. העור שלך עשוי להיות רגיש במיוחד בעקבות הסרת שיער IPL ורגיש במיוחד לכוויות שמש. יש למרוח קרם הגנה (SPF 15 ומעלה) על האזור שהוסר שיער או לכסות את האזור שהוסר בבגדים מתאימים.

- המכשיר מיועד למשתמש יחיד.

- כישורים מקצועיים והכשרה אינם נדרשים לשימוש, אנא עיין במדריך למשתמש לפני השימוש.

- מכשיר זה אינו מומלץ לשימוש על שיער אדום, אפור, בלוניני או בהיר מאוד מאחר והוא אינו יעיל על צבעי שיער אלו.

מידע על המוצר

שם המוצר: IPL מכשיר להסרת שיער
דגם: UIM20 GR, UIM20 BK, UIM20 SL, UIM20 CB, UIM20 WR

מידע לשימוש

מכשיר להסרת שיער IPL מיועד להסרת שיער לא רצוי. המכשיר מיועד גם להפחתה ממושכת בצמיחה מחודשת של שיער, המוגדרת כהפחתה ארוכת טווח ויציבה במספר השערות הצומחות כאשר נמדדת ב-6, 9 ו-12 חודשים לאחר השלמת משטר טיפול.

האריזה מכילה

מכשיר להסרת שיער IPL×1


מתאם×1

כבל חשמל×1


מדריך למשתמש×1

סבין גילוח×1


משקפי מגן×1

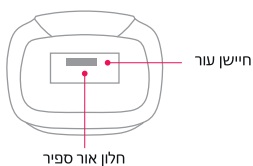


משקפי מגן

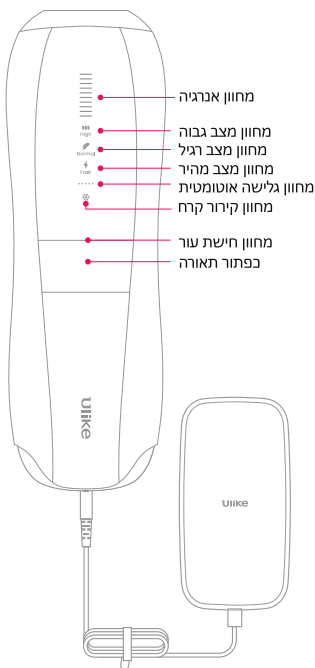

מכשיר IPL

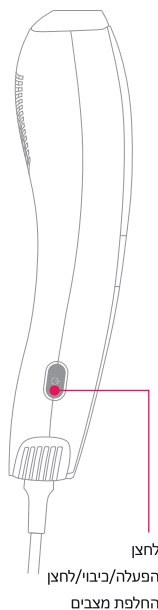

כבל חשמל

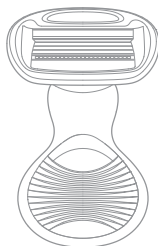

מכשיר גילוח

מכשיר הסרת שיער IPL הוא מכשיר מבוסס אור להסרת שיער לטווח ארוך, המתאים לשימוש ביתי. הוא מיועד להסרת שיער לא רצוי ולהפחתה ממושכת בצמיחה חוזרת של שיער. האזורים האידיאליים לשימוש כוללים את בתי השחי, קו הביקיני, הידיים והרגליים. המכשיר עושה שימוש בטכנולוגיית IPL עם רמת אנרגיה נמוכה, כולל 3 מצבי כוח. טכנולוגיית אור פועם אינטנסיבי (IPL) מסוגלת להשיג תוצאות של הסרת שיער לטווח ארוך ברמות אנרגיה נמוכות בהרבה מהשימוש במכשירים אחרים להסרת שיער מבוססי אור.

עקרונות הפעולה הוא פוטותרמוליזיס סלקטיבי, והמשמעות היא שהמכשיר פוגע בצמיחת השיער באמצעות חימום סלקטיבי של זקיקי השיער באמצעות אור.

כיצד להשתמש

טווחי יישומים

התקן להסרת שיער IPL מיועד להסרת שיער של אזורים גדולים (כגון ידיים, רגליים, חזה) ואזורים קטנים (כגון אצבעות, שפם). אנא בדוק את טבלת גוון העור שלהלן כדי לקבוע אם IPL מתאים לך.

שימוש על סוגי עור וסוגי שיער מקובלים

מכשיר זה מיועד לשמש רק ב-Fitzpatrick Skin Types I-V. אנא עיין בתרשים שלהלן.

- אנא זהה את גוון העור שלך ובדוק את התרשים הבא כדי לראות אם המוצר מתאים:

גוון עור צבע שיער						
	לבן	ב'ל	חום בהיר	חום בינוני	חום כהה	חום שחור כהה
לבן/אפור	✗	✗	✗	✗	✗	✗
אדום	✗	✗	✗	✗	✗	✗
בלונד בהיר	✗	✗	✗	✗	✗	✗
חום בהיר	✓	✓	✓	✓	✓	✗
חום	✓	✓	✓	✓	✓	✗
חום כהה	✓	✓	✓	✓	✓	✗
שחור	✓	✓	✓	✓	✓	✗

(מקרא סימנים: ✗ פירושו לא רלוונטי ✓ פירושו רלוונטי)

הערות:

- בחר את המצב המתאים ביותר לסבילות העור שלך, ואם אין תגובות שליליות, עברו בהדרגה למצבי אנרגיה גבוהים יותר.
- צבע העור שלך עשוי להשתנות, למשל בגלל שהעור שלך היה שזוף: אז הוא עשוי להיות כהה יותר מגוון העור במהלך הסרת השיער הקודמת. לכן, חשוב לך לבדוק את ההגדרות לשימוש לפני כל הסרת שיער ולקבוע הגדרות שונות לפי אזורי הסרת שיער שונים. אזורים מסוימים עשויים להיות כהים יותר מאחרים.
- משתמש עם סוג עור V צריך להשתמש במכשיר בהירות מסוימת מכיוון שהם

נוטים יותר לחוות תופעות לוואי. העצה היא להשתמש במצב מהיר עבור סוג עור V. אם אתה מתקשה לזהות את עצמך כסוג עור V לעומת VI, אנא התייעץ עם הרופא שלך.

לפני השימוש

משתמש בסכין הגילוח המסופק יחד עם המכשיר כדי להסיר את כל השיער הנראה על העור לפני השימוש במכשיר. ודא שלא נשאר שיער מעל פני העור שכן הדבר עלול לגרום לאי נוחות. הסר כל מוצרי קוסמטיקה, קרמים וקרם מהאזור שאתה רוצה לבצע הסרת שיער. נקה את אזור הסרת השיער ויבש.


בדיקת עור

- לפני הסרת השיער הראשונה שלך, אנו ממליצים לך לבדוק את העור שלך עבור תגובות.


- בחר חלק בגוף שאתה מתכוון לטפל בו. חבר את המתאם ואת כבל החשמל, ולבסוף חבר את כבל החשמל למקור החשמל. לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל אותו. לחץ בחוזקה על חלון אור ספיר על העור שנבחר עד שמחווני חישת העור נדלק. העבר את המכשיר לעמדת בדיקה אחרת ושנה מצב הסרת שיער, לחץ על לחצן התאורה כדי לבצע תהליך בדיקה נוסף. אם זה מרגיש נוח, שנה מצב ונסה את זה על עמדת בדיקה אחרת.

- אין להחיל יותר מבזק אחד על אותו נקודה. המתן שתיים לאחר הבדיקה, כדי לוודא שהעור שלך מתאים להסרת שיער ואין תגובה שלילית לאנרגיית האור. אם אין חריגה בעור לאחר שתיים, ולא הרגשת חום עד במהלך הבדיקה, אז המצב הגבוה יותר בו השתמשת מתאים לעור שלך. אתה יכול להמשיך לבדוק את רמת האנרגיה הבאה עד שתמצא את הרמה המקסימלית המקובלת לאזור העור המיועד.



הוראות

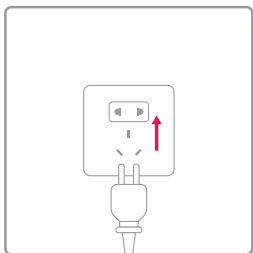

2. חבר את הקצה השני של כבל החשמל לשקע חשמל. חבר את כבל החשמל, המתאם והמכשיר כפי שמוצג באיור. (הערה: זה מכשיר פלאג-אין, נא לשמור אותו תמיד מחובר לחשמל במהלך השימוש. אחרת, זה לא יעבוד).

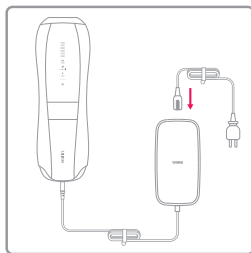


1. חבר את כבל החשמל ואת המתאם כפי שמוצג באיור.

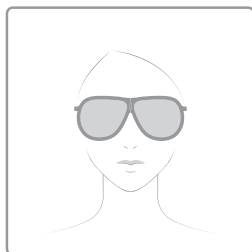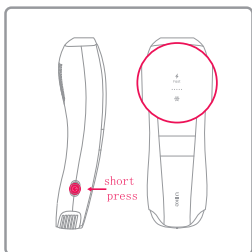


3. הרכיבו את המשקפיים לפני תחילת הסרת השיער.

4. לחץ על לחצן ההפעלה בצד המכשיר כדי להפעיל אותו. מצב ברירת המחדל הוא מצב מהיר, ופונקציית הקירור תופעל (המחונן המתאים נדלק).


הערה: פונקציית הקירור מיועדת לחוויית הסרת שיער טובה יותר, אך לפונקציה עצמה אין השפעה טיפולית.

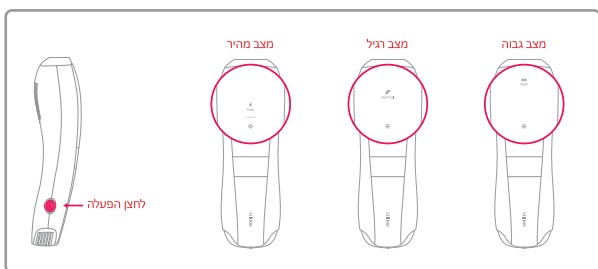

5. המכשיר מציע 3 מצבים. בזמן שהמכשיר מופעל, לחץ על לחצן ההפעלה כדי לעבור למצב השימוש הרצוי. המצבים עוברים בסדר הבא: מצב מהיר - מצב רגיל - מצב גבוה - מצב מהיר.

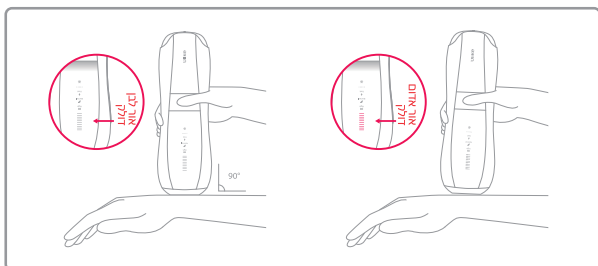

6. A, ראשית, מקם את חלון האור ספיר בצורה אנכית על אזור העור שיש לטפל בו, B, הבטחת מגע מלא עם העור שלך, מסומן על ידי מחונן חישת העור מאיר לבן. C, לבסוף, לחץ על כפתור ההדלקה כדי להתחיל בהסרת שיער. הערה: אם הנורה האדומה נדלקת, זה מצביע על מגע לא מספק בין חלון אור ספיר לעור, והמכשיר לא ישדר פעימת אור.

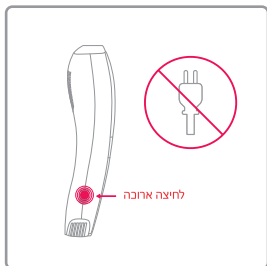


לאחר סיום הסרת השיער, לחץ והחזק את לחצן ההפעלה למשך 1.2 שניות על מנת לכבות את המכשיר. נורית החיווי תיכבה, ומסמנת שהמכשיר כבוי. חשוב לא לנתק את המכשיר ישירות מבלי לכבות אותו כראוי תחילה.

הערה: למכשיר יש מודול זיהוי מהירות מאוורר המזהה את מהירות המאוורר. כאשר מהירות המאוורר נמוכה מ-70% מהמהירות המדורגת, המכשיר יכבה אוטומטית, כדי למנוע את הטמפרטורה הגבוהה המקומית המובילה לכוויות.

זיהוי חיישן עור


- 1, SkinSensor מזהה ומזהה את צבע העור, ומתאים את העוצמה על סמך גוון העור המוכר.
- 2, וודא שה-SkinSensor המובנה נמצא במגע מלא עם העור.
- 3, אם מזהה גוון עור חוקי, מחוון האנרגיה יהפוך ללבן; אם היא אינה במגע מלא עם העור או שתזוזה אבן עור לא חוקית, מחוון האנרגיה יהפוך לאדום.

מצבי הפעלה

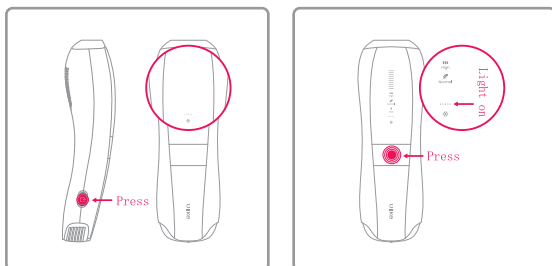

1. המכשיר מציע שני מצבי הפעלה נפרדים: מצב גלישה אוטומטית ומצב ידני.
2. איך מחליפים את שיטות השימוש? - לחץ על לחצן התאורה למשך 1.2 שניות כדי לעבור למצב גלישה אוטומטית או למצב ידני.
3. יש לציין, מצב מהיר, מצב רגיל ומצב גבוה, תומכים הן במצב גלישה אוטומטית והן במצב ידני;

• גלישה אוטומטית (עבור אזורים גדולים כגון ידיים, רגליים):

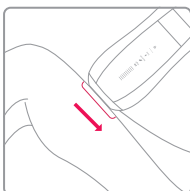


לחץ לחיצה ארוכה על לחצן התאורה למשך 1.2 שניות כדי להפעיל את הגלישה האוטומטית ומחוון הגלישה האוטומטית יידלק. כאשר נכנסים ל-Auto-Glide, ייפלטו הבזקים במרווח מסוים, אז נא לשמור את חלון האור ספיר במגע מלא עם העור והמשיכו להזיז את המכשיר, החלק אותו הלך ושבו פעמיים על האזור שיש לטפל בו כדי להבטיח

שהאזור מכוסה באופן שווה ולהימנע מחוסר אור. מתחת ל-Auto-Glide, לחץ שוב על לחצן התאורה למשך 1.2 שניות כדי לחזור למצב הידני.

כאשר מחוון ה-Auto-Glide נדלק, פירוש הדבר הוא ש-Auto-Glide מופעל, והמכשיר פולט אוטומטית פולסי אור במרווחים מוגדרים מראש, ומבטל את הצורך בהתערבות ידנית. נא לשמור את חלון האור במגע מלא עם העור ולהמשיך להזיז את המכשיר על אזור הסרת השיער כדי להבטיח שהעור מכוסה בצורה אחידה ולהימנע מחוסר של אזורי הסרת שיער.

• מצב ידני (מתאים לאזורים קטנים כגון שפם):

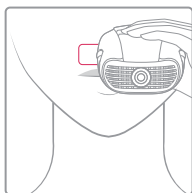

הנח את חלון האור ספיר על האזור המיועד לעיבוד ובמגע מלא עם העור. מחוון חישת העור יידלק, מה שמצביע על כך שחלון האור נמצא במגע מלא עם העור. לחץ לחיצה קצרה על כפתור ההדלקה כדי להתחיל בהסרת שיער. הזז את חלון אור ספיר לאזור הבא, המתן עד שהאור הלבן של מחוון חישת העור יידלק, ולאחר מכן לחץ שוב על כפתור התאורה כדי לחזור על הפעולה לעיל לפי הסדר.

הנח את חלון האור ספיר על האזור המיועד לעיבוד ובמגע מלא עם העור. מחוון חישת העור יידלק, מה שמצביע על כך שחלון האור נמצא במגע מלא עם העור. לחץ לחיצה קצרה על כפתור ההדלקה כדי להתחיל בהסרת שיער. הזז את חלון אור ספיר לאזור הבא, המתן עד שהאור הלבן של מחוון חישת העור יידלק, ולאחר מכן לחץ שוב על כפתור התאורה כדי לחזור על הפעולה לעיל לפי הסדר.

■ משטר הסרת שיער מומלץ

שבוע 1-4: שלוש פעמים בשבוע, כל יומיים.
משבוע 5: התאם את לוח הזמנים להסרת שיער פעם בשבועיים או פעם בחודש, על סמך צמיחת השיער שלך.
שים לב שאתה יכול להתאים אישית את לוח הזמנים ומצב הסרת השיער בהתאם לסוג השיער שלך. לשיער עבה או כבד יותר, אתה יכול לשקול להגדיל את המצבים והתדירות במסגרת הסובלנות שלך.
זכור כי צמיחת שיער אינדיבידואלית משתנה, והתוצאות עשויות להיות שונות עבור כל אדם.

■ טיפוח העור לאחר הסרת שיער

לאחר הסרת שיער, רצוי למרוח קרם גוף או ג'ל קומפרס קר לטיפול נכון. בנוסף, הימנע מחשיפת אזורים שהוסרו שיער לאור השמש. המתן לפחות 48 שעות לאחר הסרת השיער לפני שתאפשר חשיפה ישירה לאור שמש לעור שהוסה. והימנע ממוצרי טיפוח המכילים אלכוהול וחומרים חומציים/בסיסיים.

תחזוקה

ניקוי

- על מנת להבטיח את התוצאות הטובות ביותר ואת חיי השירות של המוצר, נא לנקות את המוצר לפני ואחרי כל שימוש כדי למנוע הצטברות פסולת.
- לפני הניקוי יש לכבות את המכשיר ולנתק אותו מהחשמל כדי לאפשר למכשיר להתקרר.
- השתמש במטלית רכה, נקייה ויבשה כדי לנגב ולנקות את משטח החלון הבהיר.
- לעולם אל תשטוף את המוצר והאביזרים מתחת לברזים או במדיחי כלים.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים (משחת שיניים וכו') או נוזלים קורוזיביים (בנדין, שמן מנוע, אצטון וכו') לניקוי המוצר.
- הערה: אם המים לא מתנקים היטב, השתמשו במטלית טבולה באלכוהול בריכוז 75% לניקוי המכשיר.
- בסיום הניקוי, אנא ערכו בדיקה ויזואלית כדי לבדוק אם יש שאריות לכלוך.
- אם המכשיר אינו נקי מבחינה ויזואלית, אנא חזור על שלבי הניקוי לעיל.

אחסון

- נקו את המכשיר לפני אחסנתו.
- אחסן את המכשיר בסביבה יבשה נטולת אבק בטמפרטורה של -10°C ~ $+55^{\circ}\text{C}$ / 14°F ~ 131°F

מיחזור

- על מנת למזער את הסכנות לבריאות ולסביבה ולהבטיח שניתן למחזר חומרים, יש להשליך מוצר זה למתקן איסוף נפרד לפסולת של מכשירי חשמל ואלקטרוניקה בהתאם לדרישות הסביבה המקומיות.



פתרון בעיות

להלן סיכומי הבעיות הנפוצות ביותר שאתה יכול להיתקל בהן במכשיר. אם אינך מצליח לפתור את הבעיה עם המידע שלהלן, אנא צור קשר עם המפיץ המקומי שלך או למוכר

בעיה	סיבה אפשרית	פתרון
לא מצליח לאתחל כרגיל	חשמל לא מחובר	בדוק אם המכשיר מחובר לחשמל.
חלון התאורה לא יהיה במגע מלא עם העור שלך	ייתכן שחלון האור לא יהיה במגע מלא עם העור שלך	ודא שחלון האור מכסה את עורך במלואו; ברגע שמחווון חישת העור נדלק, לחץ על לחצן התאורה.
כאב בלתי נסבל במהלך הסרת השיער	לא גולח שיער באזור המטופל	לפני השימוש יש לגלח את השיער באזור המיועד לעיבוד. אי ביצוע פעולה זו עלול לגרום לשריפת שיער במכשיר, שעלול לגרום לאי נוחות.
	המצב שנבחר חזק מדי	בחר מצב בעצימות נמוכה יותר
	חלון האור פגום	לאחר 30 שניות של הפעלה, בדוק את חלון האור לאיתור ערפל מים. אם אף אחד לא קיים, אנא פנה לתמיכה של Ulike לסיוע נוסף.
לאחר השימוש, אזור הסרת השיער הופך לאדמומי	אדמומיות קלה היא נורמלית ואינה מזיקה לגוף, והיא תדעך בקרב	מרחו ג'ל אלווה כדי להרגיע את העור, או השתמשו באפקט הקירור של חלון האור.
תוצאה בלתי מספקת בהסרת שיער	אתה משתמש ברמת אנרגיה נמוכה מדי עבורך	אנא בחר רמה גבוהה יותר בפעם הבאה next time
	פספס כמה נקודות באזור שהוסר שיער	ההבהוב צריך להיות בסמיכות וצריכה להיות חפיפה מסוימת בין אזורי ההבזק.
	המכשיר הזה לא מתאים לגוון העור או צבע השיער שלך	אם השיער שלך בלונדיני בהיר, אפוף, אדום או לבן, הסרת השיער לא תהיה יעילה.
	תדירות שימוש לא מספקת	לתוצאות טובות יותר של הסרת שיער, אנו ממליצים על לוח הזמנים הבא להסרת שיער: שבועות 1-4: כל יומיים שבועות 5-12: פעם בשבועיים או פעם בחודש
	התגובה שלך לחשיפה לאור איטית או שהשיער שצריך להסיר הוא עבה.	אזורי שיער עבים יותר, כגון קו הביקיני, בתי השחי והזקן, עשויים לדרוש יותר זמן והסרת שיער חוזרת ונשנית כדי לראות ירידה משמעותית. לסוגי עור שונים עשוי לקחת זמן רב יותר להגיב לאור, לכן מומלץ להמשיך להשתמש במוצר שלנו עד 3 חודשים לתוצאות מיטביות.
המכשיר מתחמם במהלך השימוש	עשוי להיות בגלל הפעלה ממושכת	כבה את המכשיר ותן לו הפסקה לכמה דקות.

מפרט טכני

שם המוצר	מכשיר להסרת שיער בשיטת IPL
דגם מוצר	UIM20 GR, UIM20 BK, UIM20 SL, UIM20 CB, UIM20 WR הערה: הבדל בדגם קיים רק בצבע המארז, UIM20 GR הוא אפור, UIM20 BK הוא שחור, UIM20 CB הוא כחול, UIM20 SL הוא כסף, UIM20 WR הוא לבן.
מידות (B x H x D)	206.73mm*68.68mm*54.29mm
קלט חשמלי	100-240Vac 50/60Hz 1.5A
רמת אנרגיה	1~10 level
גודל האזור המואר	3.9cm ² /0.6 sq in
אורך גל	550nm~1200nm
אנרגיה פלט	8.72-30J
צפיפות אנרגיה	2.23J/cm ² ~7.69J/cm ²
משך הפולס	0.27ms-3.05ms
גרסת התוכנה:	V1.0
מצבים תפעוליים	Operating temperature: 5°C ~ 30°C/ 41°F ~ 86 °F Humidity: 5%~ 80%RH Relative pressure: 80kPa ~106kPa
תנאי אחסון והובלה	Storage temperature:-10°C ~ 55°C/ 14 °F ~ 131 °F Humidity: 5%~ 90%RH Relative pressure: 50kPa~106kPa
מתאם	INPUT: 100-240Vac 50/60Hz 1.5A OUTPUT: 320V 0.24A + 24V 1.25A
לאחר הוצאת המכשיר מאחסון בטמפרטורת סביבה הנמוכה מ-10°C, ידרש זמן מסוים למכשיר לשוב לפעולה רגילה בטמפרטורת סביבה של 20°C.	שעתיים
לאחר הוצאת המכשיר מאחסון בטמפרטורת סביבה הגבוהה מ-60°C, ידרש זמן מסוים למכשיר לשוב לפעולה רגילה.	שעתיים

סמלים

מס.	סמל	תאור
1		שימוש בייתי
2		WEEE (הוראות טיוב פסולת חשמלית ואלקטרונית). מוצרי הפסולת צריכים להיות מטופלים בהתאם לחוק.
3		שמור מרחק מגשם
4		יצרן
5		סמל אזהרה לשימוש עם מכשיר IPL: אל תשתמש בו ישירות על העיניים, מכיוון שהאור האינטנסיבי שמפיץ המכשיר עלול לגרום נזק לעיניים.
6		עיין בהוראות השימוש.
7		זהירות
8		DC יציאת
9		מספר מקסימלי של חבילות/פריטים זהים שניתן להניח על החבילה התחתונה, כאשר '5' הוא המספר המגביל.

מספר חשבונית:	שם החנות:	תאריך רכישה:
מספר סידורי:	דגם:	שם היצרן:
E-MAIL:	טלפון:	שם הלקוח:
כתובת:		

BDK GROUP בע"מ, (להלן "החברה") אחראית בזה בפני הרוכש (להלן "הלקוח") לפעולתו התקינה של המכשיר (להלן "המוצר") לפי הפרטים המצוינים לעיל, בכפוף לתנאים כדלקמן:

האחריות למוצר היא לתקופה של 12-3 חודשים מיום הרכישה בכפוף לחוק הגנת הצרכן | אחריות תקפה רק בצירוף חשבונית רכישה | האחריות למתן שירות באמצעות החברה בלבד ו/או מעבדות שירות מטעמה | הובלת המוצר למעבדה היא באחריות הלקוח בלבד, במידה ויבקש להשתמש בשירותי ההובלה של החברה, הוצאות ההובלה יחולו על הלקוח | האחריות כוללת תיקון ללא תמורה של קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות ולהחליף, במידה ויידרש, את המוצר כולו או חלק ממנו | אין אחריות חלה במקרה של שבר או נזק | אחריות על סוללה 6 חודשים, אחריות על מטען 3 חודשים.

האחריות לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:
התקלה במוצר היא עקב שימוש לא מתאים, או שימוש שלא למטרה, או בניגוד להוראות, או תקלות שמקורן במתח חשמלי, או כל חיבור חשמלי שלא סופק על ידי החברה | המוצר תוקן או טופל על ידי גורם אשר אינו מאושר מטעם החברה | בכל מקרה, בין אם בדזון ובין אם הקלקול נובע מרשלנות, כוח עליון, שפיכת נוזלים, קורוזיה, שבר, חשיפה לשמש ו/או לטמפרטורות קיצוניות, התפוצצות | האחריות לא חלה על אביזרים נלווים כגון: כיסויים, סוללות, אוזניות, מגני מסך, כבלים, נרתיקים, רמקולים ניידים וכד.

אם במהלך תיקון יתגלה כי הקלקול נגרם באחת מן הנסיבות המוזכרות לעיל ו/או בקשר עם ליקוי או אי התאמה בתוכנה, הרוכש ישלם עבור שעות העבודה שידרשו ואביזרים שיעשה בהם שימוש או תיקון בהתאם למחירון החברה שיהיו בתוקף במועד המדובר. בשום מקרה לא תהיה החברה אחראית למידע אשר נמצא על המכשיר לרבות רשימת אנשי קשר, תמונות, קבצי מדיה ואפליקציות שנרכשו באחריות הלקוח לגבות מידע זה טרם הבאת המכשיר לתיקון.



לקבלת האחריות על המוצר יש לסרוק את ה-QR ולמלא את פרטיך.
ניתן גם להירשם ישירות באתר החברה www.bdk-group.com
בלשונית הרשמה לאחריות.

Ulike

ulike.co.il



Scan me!

הביאו את סלון היופי אל הספה שלכם

