


Ulike

Clear Pro DPL NIR Beauty Device מדריך למשתמש

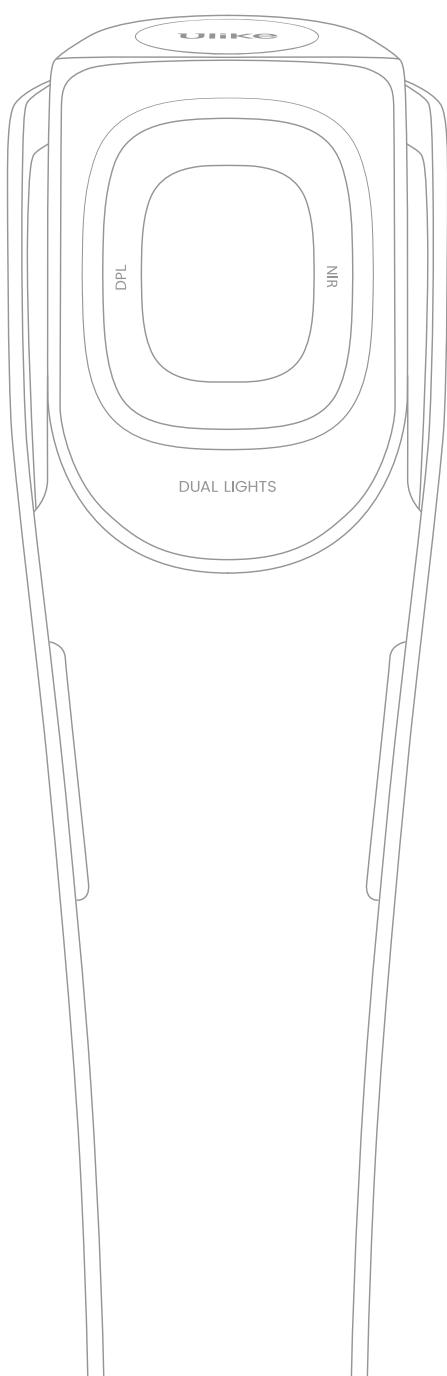

לפני השימוש ב-UD20, יש לקרוא בעיון את מדריך המוצר

אמצעי זהירות

אמצעי זהירות מיוחדים

הרכבה ושימוש במכשיר צריכים להיעשות בהתאם להוראות שצוינו במדריך למשתמש. יש לקרוא בעיון את מדריך המשתמש ולשמור אותו לעיון עתידי. אם יש לך שאלות במהלך השימוש, אנא פנה לשירות הלקוחות המקוון שלנו.

סכנה: עלול להיגרם נזק אישי עקב פעולה לא נכונה בנסיבות מסוימות. 

אזהרה: עלולה להיווצר סכנה עקב פעולה לא נכונה בנסיבות מסוימות. 

זהירות: עלולה להיגרם פגיעה אישית או נזק לרכוש עקב פעולה לא נכונה בנסיבות מסוימות. 

אזהרה: קרינת אור. 

אזהרה 

- יש להרחיק את המכשיר מהישג ידם של ילדים בעת השימוש.
- יש לבדוק ולנקות את פתח האור של המכשיר באופן קבוע כדי למנוע תקלות ונזקים.
- אין להשתמש במכשיר כאשר פתחי האוורור חסומים, כיוון שזה עלול להוביל לתקלות ולסכנת שריפה.
- אין לחשוף בגדים, שיער או חפצים אחרים לאור המכשיר כדי למנוע חריכה, שינוי צבע ונזק.
- אין להשתמש במכשיר על חיות מחמד כדי למנוע פגיעה בהן.
- יש להתייעץ עם איש מקצוע רפואי לפני ביצוע טיפולי פוטואלקטריים עם המכשיר.
- זה נפוץ שהעור יראה חמימות קלה ואדמומיות לאחר השימוש במכשיר. כדי להקל על אי נוחות בעור, ניתן לשקול להשתמש במסכת לחות והזנה עם מרכיבים פשוטים.
- עלולה להתרחש תחושת כאב במהלך השימוש עקב סוגי עור שונים. אם הכאב חזק, שקול לעבור למצב אנרגיה נמוך יותר או להפסיק את השימוש במכשיר.
- יש להרכיב משקפי מגן מיוחדים ולעצום את העיניים בעת השימוש במכשיר על אזור העור סביב העיניים.
- אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה כשהוא פועל. לאחר השימוש, יש לכבות, לנתק ולאחסן אותו בצורה בטוחה.
- אין להשתמש במכשיר בקרבת חומרים דליקים או נפיצים (כולל תרסיסים ותחנות דלק), כיוון שזה עלול להוות סכנת שריפה, התחשמלות או פגיעה.
- יש להימנע מחשיפת האזור המטופל לאור UV ישיר במשך 48 שעות לאחר השימוש במכשיר.
- אין לחשוף את המכשיר לאור שמש ישיר או לאור UV ממושך כדי למנוע נזק חמור למכשיר.
- המכשיר מיועד לשימוש רק עם ספק הכוח המסופק יחד עם המכשיר.
- **אזהרה:** עלולה להתרחש פגיעה בעיניים (שעשויה להוביל לאובדן ראייה) או פגיעה בעור אם לא יפעלו לפי ההוראות. יש לקרוא ולפעול לפי ההוראות.
- **אזהרה:** נזק לעור עלול להתרחש לאחר יישום ממושך או חוזר על אותו אזור.
- **אזהרה:** אין לעקוף את מנגנוני הבטיחות המובנים במכשיר.
- **אזהרה:** אם אתה נוטל תרופה או טיפול צמחי שגורם לרגישות לאור, יש להתייעץ עם רופא לפני השימוש במכשיר, שכן השימוש עשוי להזיק לעור.
- המכשיר אינו מיועד לטיפול במצבים רפואיים. יש לפנות לייעוץ רפואי במקרים של, למשל, שומות, פריחה בעור, עור מגרד, פטרת עור או זיהום, בליטות בעור או תגיות עור.
- יש להימנע משימוש יתר הכולל העברות מרובות, הצטברות פולסים ואו הגדלת תדירות השימוש.
- יש לוודא שאין נזק גלוי לעדשת הפליטה או למארז המכשיר. אם יש נזק, אין להשתמש במכשיר.
- מכשיר זה יכול לשמש ילדים מגיל 16 ומעלה, וכן אנשים עם מוגבלות פיזית, תחושתית או נפשית, או חוסר ניסיון וידע, אם הם קיבלו השגחה או הנחיה לגבי השימוש במכשיר באופן בטוח ומבינים את הסיכונים הכרוכים בכך.

⚠ זehירות

אנשים עם המצבים הבאים מומלצים שלא להשתמש במכשיר כדי למנוע תאונות או בעיות עור וגוף אפשריות:

- מחלת לב, תפקוד לקוי של הלב או נטייה לכך.
- שכרות או פגיעה בתקשורת.
- חוסר יכולת לחוש בטמפרטורה או בגירויים.
- ניתוחים שבוצעו לאחרונה (בתוך 2 השבועות האחרונים).
- חוסר ודאות בנוגע לשימוש במכשיר. יש להתייעץ עם איש מקצוע רפואי לקבלת הנחיות.
- מחלות חריפות, מחלות זיהומיות, גידולים ממאירים, יתר לחץ דם, הפרעות דם, חום או טמפרטורת גוף לא תקינה.
- פגיעות תחושתיות עקב מצבים כמו סוכרת, הפרעות נוירולוגיות, אפילפסיה, מצבים דרמטולוגיים, דרמטיטיס תורשתית, הריון או הנקה.
- ורידים דליות או מחלות כלי דם באזורים המוקרנים.
- חילוף חומרים לא תקין של קולגן, כולל היסטוריה של צלקות וריפוי פצעים לקוי.
- אזורים מודלקים, קרומים ריריים או אזורים רגישים.
- אזורים שנפגעו מהרפס סימפלקס, נגעי עור, המטומות או מצבים דומים.
- אשפוז, נטילת תרופות, אלרגיות, דרמטיטיס במגע, היסטוריה של מחלות עור או אי נוחות בעת השימוש במכשיר.
- תרופות כמו מדכאי חיסון, אספירין או איזוטרטינואין.
- הפרעות דימום או מריחה מקומית של איזוטרטינואין, חומצה אלפא הידרוקסית (AHA), חומצה סליצילית (BHA) או חומצה אזלאית.
- חשיפה לשמש או נזקי שמש (כוויות שמש) במהלך 3 הימים האחרונים. המתן עד שהעור יחלים לפני השימוש במכשיר.
- שימוש במוצרים להבהרת עור בשבוע האחרון או קוסמטיקה המכילה מרכיבי ויטמין A.
- גיל מתחת ל-16 שנים.
- שימוש משולב עם מוצרי שמן אתרי.
- עור עם שאריות של קרמים, תחליבים או חומרי סיכה. ודא שהעור נקי ויבש לפני השימוש.
- נטילת אנטיביוטיקה המופעלת על ידי אור כמו טטרציקלין לאחרונה.
- פצעים שלא החלימו מכל סוג שהוא.
- חוסר יכולת לתקשר או אנשים עם מוגבלויות. יש להימנע משימוש כדי למנוע תאונות.
- אנא התייעץ עם איש מקצוע רפואי לקבלת הנחיות אם יש צורך.

אזורים בגוף שבהם השימוש במכשיר אסור כוללים:

1. איברי מין
2. גלגלי העיניים, עפעפיים ואזור מתחת לעיניים
3. אוזניים
4. ורידים ועורקים גדולים
5. בלוטת התריס
6. גבות וריסים
7. פטמות ועטרה




- יש להימנע משימוש במכשיר בקרבת אמבטיות, מקלחות, כיורים או כל כלי אחר המכיל מים.
- יש לשמור את המכשיר מחוץ להישג ידם של ילדים.
- משתמשים במצב גופני או נפשי לקוי (כולל ילדים) וחסרי ניסיון וידע רלוונטי צריכים להשתמש, לנקות ולתחזק את המכשיר תחת השגחה והדרכה של מבוגר אחראי.
- יש לשמור על המכשיר ועל מתאם הכוח יבש.
- אם המכשיר נפגע, יש להפסיק את השימוש בו מיד ולהימנע ממגע עם חלקים פנימיים כדי למנוע התחשמלות.
- יש להימנע משימוש ממושך או חוזר על אותו אזור שטח כדי למנוע נזק לעור או לגוף.


II. Main Performance Parameters

שם המוצר	Ulike Clear Pro DPL NIR Beauty Device
דגם	UD20
קלט מדורג	24V $\approx$ 3.75A
מצבי פעולה	NIR (מצב עור חלבי) REDNESS (מצב תיקון) BRIGHTEN (מצב הבהרת עור)
טווח אורך גל	500 ~ 650nm & 900 ~ 1800nm
תנאי הפעלה	טמפרטורת סביבה: 5°C~30°C לחות יחסית: $\leq$ 80%RH לחץ אטמוספרי: 80kPa-106kPa
יצרן	Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd.
כתובת	Room 810, Building 1, Xunmei Science and Technology Plaza, No. 8 Keyuan Road, Science Park Community, Yuehai Sub-District, Nanshan District, Shenzhen
פלט אופטי	NIR (אור ירוק בהיר) REDNESS (אדום בינוני) BRIGHTEN (אור אינפרה-אדום בהיר)
מתאם	יצרן: ASIAN POWER DEVICES INC דגם: DA-90Q24 קלט: 100V-240V~, 50/60Hz, 1.5A פלט: 24.0V 3.75A, $\approx$ 90W
	יצרן: Mass Power Electronics Inc דגם: E 090-1E 240375M2 קלט: 100V-240V~, 50/60Hz, 1.5A פלט: 24.0V 3.75A, $\approx$ 90W
	יצרן: Dongguan Shilong Fuhua Electronic Co., Ltd דגם: UES90A-240375SPA1 קלט: 100V-240V~, 50/60Hz, 1.5A פלט: 24.0V 3.75A, $\approx$ 90W

III. מבנה המוצר ואביזרים

התקן כולל כפתור הפעלה/כיבוי, כפתור מצב, כפתור תאורה, פתח יציאה לאור ספיר, מחוון מצב הפעלה אוטומטית, מחווני מצב, כבל חשמל, מתאם חשמל, ומשקפי מגן.

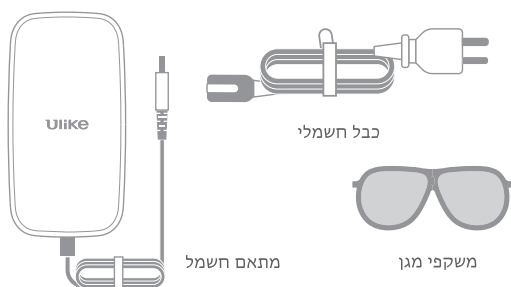


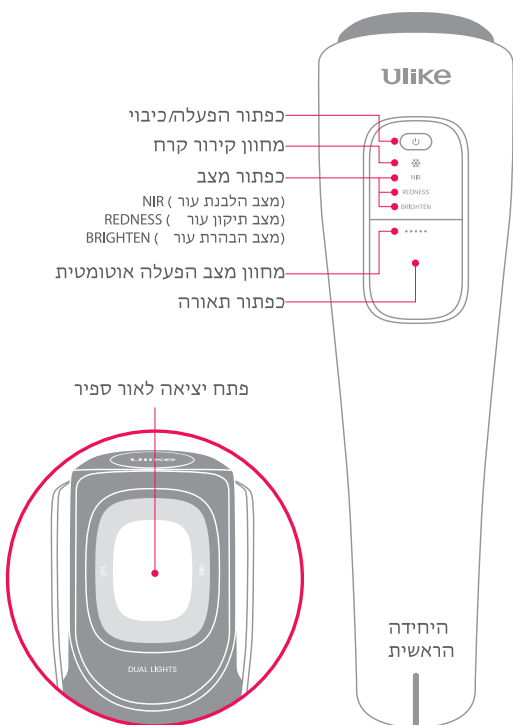


IV. אמצעי זהירות לפני השימוש

- הסר את היחידה הראשית ואת האביזרים מהאריזה. שמור את חומרי האריזה לשימוש עתידי עבור הובלה, אחסון, וביקורת.
- בדוק וודא שהיחידה הראשית והאביזרים שלמים וללא נזק מכני כלשהו. אם נמצאו סימנים לנזק תפקודי, אל תשתמש במכשיר. במקום זאת, פנה מיד ליצרן או לספק שירות לאחר מכירה.
- במקרה של עלייה פתאומית בעוצמת האור במהלך השימוש, כבה את המכשיר מיד ופנה ליצרן או למפיץ המקומי לתיקון.
- לפני השימוש, נקה את העור וודא שהוא יבש.
- הימנע מחשיפה ישירה לשמש לפני ואחרי השימוש.
- ראשי תיבות של DPL הם Dual Premium Lamps, ומתייחס למבנה המנורות הכפולות של המכשיר.


V. כיצד להשתמש

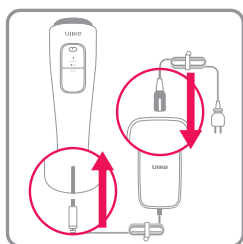

1. חבר את כבל החשמל, את המתאם, ואת המכשיר כפי שמוצג בתרשים.

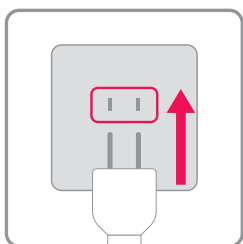


2. חבר את הקצה השני של כבל החשמל לשקע חשמלי.

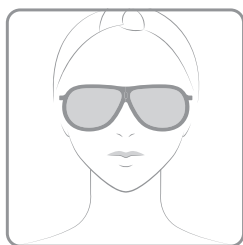


3. הרכב משקפי מגן.



4. לחץ על כפתור ההפעלה/כיבוי או כפתור המצב כדי להפעיל את היחידה הראשית. נורית הנשימה תציין שהמכשיר במצב המתנה.

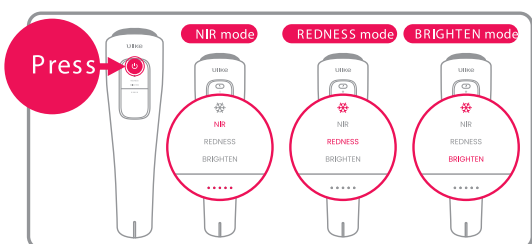


5. למכשיר זה יש שלושה מצבים שניתן להחליף ביניהם על ידי לחיצה על כפתור ההפעלה/כיבוי/מצב. סדר המצבים הוא: NIR → REDNESS → BRIGHTEN → REDNESS → NIR.

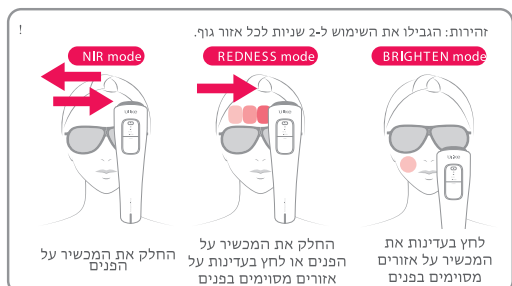

6. בחרו את המצב המתאים בהתאם לצרכים האישיים שלכם. וודאו שמשטח המגע של המכשיר מותאם היטב לעור במהלך השימוש (אחרת, המכשיר לא יפלוט אור).


המצבים מיושמים כדלקמן:

(מצב הלבנת עור) NIR פועל על מולקולות המים בעור להלבנה וגמישות. הפעלה על ידי לחיצה על כפתור התאורה ויישום המכשיר בעדינות על הפנים.
(מצב תיקון עור) REDNESS מרגיע ומתקן עור רגיש.
(מצב הבהרת עור) BRIGHTEN יש להשתמש באזורי פנים מסוימים בתנועה עדינה של לחיצה.

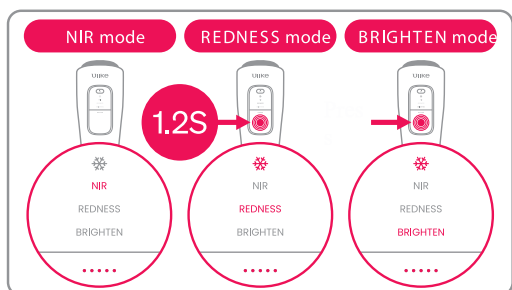

7. תיאור כפתור התאורה:

במצב NIR, לחיצה אחת על כפתור התאורה מפעילה את מצב ההפעלה האוטומטי. במצב REDNESS, יש ללחוץ ולהחזיק את כפתור התאורה למשך 1.2 שניות להפעלת מצב ההפעלה האוטומטי. במצב BRIGHTEN, יש ללחוץ ולהחזיק את כפתור התאורה כדי להפעיל את מצב ההפעלה האוטומטי.

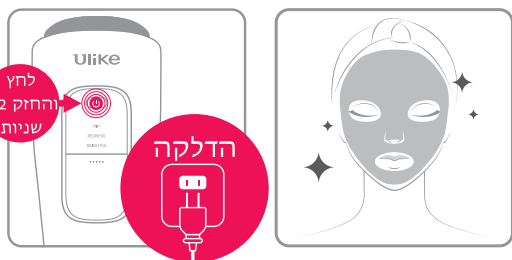

8. כבו את המכשיר על ידי לחיצה והחזקה של כפתור ההפעלה/כיבוי/מצב למשך 1.2 שניות.

9. לאחר השימוש, יש לטפל בעור על ידי הנחת קומפרס קר ולאחר מכן שימוש במסכה לחות בסיסית.

אזהרה: כדי למנוע נזק פוטנציאלי, וודאו שהמכשיר כבוי לפני ניתוקו מהחשמל.

תדירות השימוש

- בחרו את המצב המתאים בהתאם למצב העור שלכם בזמן השימוש:
- מצב NIR: השתמשו במשך 5 דקות בכל פעם, 3-4 פעמים בשבוע.
 - מצב REDNESS: השתמשו במשך 5 דקות בכל פעם, 3-4 פעמים בשבוע.
 - מצב BRIGHTEN: השתמשו 3 פעמים בשבוע, כאשר מתמקדים בכל אזור גוף 3 פעמים עם שימוש בימים לסירוגין.

תחזוקה וטיפול במוצר

1. ניקוי המוצר

1. כבו את המכשיר, נתקו את התקע, ותנו למכשיר להתקרר לפני הניקוי.
2. מומלץ לנקות את חלון היציאה של האור ואת פני השטח של ראש האור עם מגבונים נטולי אלכוהול או רקמות רכות לאחר כל שימוש.
- זהירות: אם הניקוי במים אינו יעיל, ניתן להשתמש במטוש כותנה או בד נקי שטבול ב-75% אלכוהול רפואי לניקוי. אין לנקות את המכשיר עם צמר פלדה או חומר ניקוי מאכל.
3. אין להשרות את המכשיר או את האביזרים במים או לשטוף אותם במים.
4. המכשיר מיועד לשימוש אישי בלבד; אין לשתף אותו עם אחרים.
- נקו וחטאו את פתח האור לפני כל שימוש אם המכשיר משותף בין כמה אנשים כדי למנוע זיהמים.

2. טיפול במוצר

1. שמרו על המכשיר יבש; אין לטבול את המכשיר או כל חלק ממנו במים, כדי למנוע סיכון של הלם חשמלי.
2. כדי למנוע שבירה או אובדן של המכשיר והאביזרים, אחסנו אותם בקופסת האריזה לאחר השימוש. זכרו לנקות את המכשיר לפני אחסונו.
3. אם המכשיר לא ישמש לתקופה ממושכת, אחסנו אותו במקום קריר, יבש, וחשוך, הרחק מחפצים קשים.
4. הימנעו מאחסון המכשיר והאביזרים שלו בסביבה לחה לתקופה ממושכת, שכן הדבר עשוי להשפיע לרעה על ביצועי המכשיר.
5. אין לנקות את המכשיר בזמן שהוא בשימוש או כאשר הוא מחובר לחשמל.
6. לפני כל שימוש, בדקו אם יש נזק גלוי למכשיר (כולל הכבל). אם נמצא נזק או קרע, הפסיקו מיד את השימוש. כדי למנוע סכנת חניקה או מעידה, נתקו את כבל החשמל כאשר המכשיר לא בשימוש.

3. דרישות סביבתיות לאחסון והובלה

- טמפרטורת סביבה: 10°C עד 55°C
- לחץ אטמוספירי: 50kPa-106kPa
- לחות יחסית: $\leq 90\% \text{RH}$
- אחסנו בסביבה מאווררת היטב, הרחק מגזים מאכלים.

4. פתרון תקלות

- אם נתקלתם באחת מהבעיות הבאות, עיינו בפתרונות המוצעים להלן.
- אם הבעיה לא נפתרה, פנו לשירות הלקוחות באימייל: seausupport@ulike.com

פתרונות	סיבות אפשריות	בעיות
ודא שהמכשיר מחובר לחשמל	לא מחובר לחשמל	המכשיר לא פועל
חזור לשימוש במכשיר לאחר שההתקורות הושלמה. הנח את היחידה הראשית קרוב לעור עד שהנורות מצביעות על כך שהן נדלקות.	בדוק אם הטמפרטורה של ראש היחידה הראשית והגוף גבוהה מדי. ודא שהראש במגע קרוב עם העור.	המכשיר לא פולט אור
בדוק אם החיבור לחשמל תקין תקן או החזר את המוצר	חיבור מכשיר פגום	מד כבוי
הפסק את השימוש במכשיר עד שהסימפטום יחלוף. בכל שאלה יש לפנות לשירות הלקוחות	אדמומיות קלה היא רגילה והיא תדעך במהירות	האזור המטופל הופך לאדום
בחר מצב טיפול מתאים יותר לעור שלך	המצב הנבחר לא מתאים לעור שלך	תוצאה לא מספקת לאחר השימוש
יש למרוח כראוי קרם הגנה או להגביר את אמצעי ההגנה מפני השמש	הגנה לא מספקת מהשמש לאחר השימוש	
להאריך את משך הטיפול ולהבטיח הגנה נאותה מהשמש	תגובה איטית יותר לאפקט הארה	
כבה את המכשיר ותן לו לעמוד השתמש בו רק לאחר שהתקרר	זה נורמלי ועלול להיגרם כתוצאה מהפעלה ארוכת טווח של המכשיר	המכשיר מתחמם ולח במהלך השימוש

מיחזור

על מנת למזער את הסכנות לבריאות ולסביבה ולהבטיח שניתן למחזר חומרים, יש להשליך מוצר זה למתקן איסוף נפרד לפסולת של מכשירי חשמל ואלקטרוניקה בהתאם לדרישות הסביבה המקומיות.

- במקרים הבאים, החברה לא תספק שירותי החזרה או החלפה באחריות
1. נזק למכשיר שנגרם מתאונות בלתי צפויות כגון שריפה, רעידת אדמה, שיטפון וכו'.
 2. תקלה ונזקים במכשיר שנגרמו מרשלנות המשתמש, שימוש לרעה, או שימוש אחר בתנאים חריגים.
 3. נזק למכשיר שנגרם מפירוק לא מורשה או אחסון לא תקין (כגון נזק לחולדות או נזל חלחול וכו'.
 4. נזק למכשיר שנגרם משימוש כפוי בתנאים שאינם מתאימים לשימוש (כולל אך לא מוגבל לחריגה מעומס העבודה וכו'.
 5. נזק למכשיר שנגרם על ידי תנאים אחרים מעבר לשליטה בחברה החברה לא תישא באחריות לכל נזק נלווה שייגרם כתוצאה מהתפקוד או השימוש במכשיר זה (כגון הפסקת רוח עסקי של המשתמש או הפסד אחר שנגרם כתוצאה מהשימוש במכשיר, עלות החלפת המכשיר, מכשיר או שירות עקב השימוש במכשיר זה, וכל תביעה של ה- לקוחות המשתמש). החברה תהיה אחראית לתאונות מהסוג והדרגה המסוימת המפורטים בחוקים ובדרישות הרלוונטיות.

תעודת אחריות

מספר חשבונית:	שם החנות:
מספר סידורי:	דגם:
E-MAIL:	טלפון:
תאריך רכישה:	שם היצרן:
שם הלקוח:	
כתובת:	

BDK GROUP בע"מ, (להלן "החברה") אחראית בזה בפני הרוכש (להלן "הלקוח") לפעולתו התקינה של המכשיר (להלן "המוצר") לפי הפרטים המצוינים לעיל, בכפוף לתנאים כדלקמן:

האחריות למוצר היא לתקופה של 12-3 חודשים מיום הרכישה בכפוף לחוק הגנת הצרכן | אחריות תקפה רק בצירוף חשבונית רכישה | האחריות למתן שירות באמצעות החברה בלבד ו/או מעבדות שירות מטעמה | הובלת המוצר למעבדה היא באחריות הלקוח בלבד, במידה ויבקש להשתמש בשירותי ההובלה של החברה, הוצאות ההובלה יחולו על הלקוח | האחריות כוללת תיקון ללא תמורה של קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות ולהחליף, במידה ויידרש, את המוצר כולו או חלק ממנו | אין אחריות חלה במקרה של שבר או נזק | אחריות על סוללה 6 חודשים, אחריות על מטען 3 חודשים.

האחריות לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:
התקלה במוצר היא עקב שימוש לא מתאים, או שימוש שלא למטרה, או בניגוד להוראות, או תקלות שמקורן במתח חשמל, או כל חיבור חשמלי שלא סופק על ידי החברה | המוצר תוקן או טופל על ידי גורם אשר אינו מאושר מטעם החברה | בכל מקרה, בין אם בזדון ובין אם הקלקול נובע מרשלנות, כוח עליון, שפיכת נוזלים, קורוזיה, שבר, חשיפה לשמש ו/או לטמפרטורות קיצוניות, התפוצצות | האחריות לא חלה על אביזרים נלווים כגון: כיסויים, סוללות, אוזניות, מגני מסך, כבלים, נרתיקים, רמקולים ניידים וכד.

אם במהלך תיקון יתגלה כי הקלקול נגרם באחת מן הנסיבות המוזכרות לעיל ו/או בקשר עם ליקוי או אי התאמה בתוכנה, הרוכש ישלם עבור שעות העבודה שידרשו ואביזרים שיעשה בהם שימוש או תיקון בהתאם למחירון החברה שיהיו בתוקף במועד המדובר. בשום מקרה לא תהיה החברה אחראית למידע אשר נמצא על המכשיר לרבות רשימת אנשי קשר, תמונות, קבצי מדיה ואפליקציות שנרכשו באחריות הלקוח לגבות מידע זה טרם הבאת המכשיר לתיקון.

לקבלת האחריות על המוצר יש לסרוק את ה-QR ולמלא את פרטיך. ניתן גם להירשם ישירות באתר החברה www.bdk-group.com בלשונית הרשמה לאחריות.



Ulike

ulike.co.il



Scan me!

הביאו את סלון היופי אל הספה שלכם

